

CE



Pegaz

Uživatelská příručka a údržba

Vydání 10/2022-10-25

Speciální zdravotní kočárek Pegaz

"Golfové hole"

! VAROVÁNÍ! Uživatele se zrakovým, čtecím nebo kognitivním postižením žádáme, aby kontaktovali výrobce za účelem získání informací pro uživatele ve vhodném formátu.

Účel příručky

Pokyny pro provoz a údržbu obsahuje základní informace nezbytné pro správné používání zdravotního kočárku PEGAZ, včetně principů bezpečnosti jeho použití, popis jeho konstrukce, servisu a regulace, příprava kočárku pro použití, údržba a čištění, záruční podmínky. Je určen pro lidi, kteří vykonávají přímou péči o děti se zdravotním postižením (dětské asistenty - rodiče, opatrovníci), který bude přepravován v kočárku. Je také určen pro lékaře a rehabilitace sloužící kočárek.

VAROVÁNÍ! Před použitím kočárku je každý uživatel povinen přečíst tuto příručku a následovat jej.

Tato příručka je nedílnou součástí produktu a musí být vždy připojena k prodanému produktu. Udržujte tyto pokyny pro budoucnost! Skladujte pokyny snadno přístupné. Pokyny v elektronické verzi naleznete na webových stránkách www.mywam.eu

VAROVÁNÍ! V případě jakéhokoliv lékařského incidentu spojeného s přítomností zdravotního kočárku Pegaz, okamžitě písemně oznámit výrobce písemně kontaktováním registrovaného nebo e-mailu s potvrzením o potvrzení.

Kontaktní údaje výrobce:

- Poštovní adresa: mywam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polsko
- Kontaktní telefonní číslo: +48 32 733 11 31
- E-mailová adresa: mywam@mywam.pl



Verze příručky pro provoz a údržbu: CZ Vydání 10 / 2022-10-25

MyWam Kupiec, Bartold, Axres Sp.j. Vyhrazuje si právo zavést technické a obchodní změny v obsahu provozních a údržbových pokynů bez předchozího očekávání. Každá změna bude zadána poslední aktualizací pokynů.

Obsah

▪ Úvod.....	5
1. Účel kočárku Pegaz	5
2. Základní informace o kočárku Pegaz.....	5
3. Rychlý start.....	6
▪ Bezpečnost	7
4. Důležité rady a bezpečnostní pravidla	7
5. Tabulky	8
5.1 Typový štítek.....	8
5.2 Štítek s kódem UDI.....	8
6. Výstražné tabule	8
7. Použité symboly	8
▪ Produkt	9
8. Obecná konstrukce kočárku.....	9
9. Konfigurace a použití - rám kočárku	10
9.1. Konfigurace a použití - rám kočárku.....	10
9.2. Skládání kočárku.	10
9.3. Přední dvojitá otočná kola. Blokování směru jízdy předních kol.....	11
9.4. Zadní dvojitá kola. Nezávislý brzdový systém	11
9.5. Systém odpružení všech čtyř dvojitých kol.....	11
9.6. Sklopná noha	12
9.7. Nastavitelné, ergonomické rukojeti pro tlačení kočárku	12
9.8. Podnožka. Regulace a použití.	12
9.9. Nastavení hloubky sezení	13
9.10. Nastavení výšky opěradla	13
9.11. Nastavení sklonu opěradla.....	14
10. Standardní výbava	15
10.1 Pětibodové pásy	15
10.2 Dopravní uzavěr	15
10.3 Bezpečnostní zábrana	16
10.4 Nákupní košík.....	16
10.5 Klín	16
10.6 Únosné a stabilizační pásy	17
11. Doplnkové vybavení	17
11.1 Nastavitelná stříška s okénkem.	17
11.2 Terapeutický stolek.....	18
11.3 Polštář na bederní páteř	18
11.4 Podhlavník	18
11.5 Zužující vložky	18
11.6 Turistická taška	19
11.7 Pláštěnka.....	19
11.8 Moskytiéra	19
11.9 Nánožník	19

11.10	Slunečník	19
12.	Technická specifikace kočárku Pegaz	21
12.1	Použité materiály	21
13.	Dodávka a nářadí	21
14.	Montáž a demontáž kočárku	22
15.	Příprava k použití	22
16.	Použití kočárku	23
16.1	Přemísťování kočárku	23
16.2	Nastupování a vystupování z zdravotního kočárku	23
16.3	Správná poloha na zdravotním kočárku	24
16.4	Jízda na zdravotním kočárku	24
16.5	Pohyb na svazích	24
16.6	Překonávání prahů nebo obručníků	24
16.7	Přeprava v autě a v jiných vozidlech	24
16.8	Čištění a péče	25
17.	Skladování kočárku	25
17.1	Příprava kočárku na dlouhodobé skladování	25
17.2	Ochrana proti korozi	25
18.	Opětovné použití	26
19.	Servis a periodické prohlídky	26
20.	Zpracování	27
21.	Splnění požadavků na zdravotnické prostředky	28
22.	Poznámky	29
23.	Seznam autorizovaných servisních míst	30
24.	Záruční list	31

▪ Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili speciální kočárek Pegaz. Doufáme, že bude příčinou mnoha krásných chvil s vaším dítětem a bude vám každý den pomáhat. Snažíme se zajistit, aby naše produkty splňovaly vaše očekávání a nejvyšší standardy. Doporučujeme vám kontaktovat naše zaměstnance, sledovat nás na našich webových stránkách www.mywam.eu a na sociálních sítích. Můžete se tam dozvědět mnoho zajímavého o našich produktech.

1. Účel kočárku Pegaz

"Pegaz" je multifunkční zdravotní kočárek určený pro handicapované uživatele. Kočárek je založen na rámu vyrobeném z hliníkových a ocelových prvků. Vybavený odpruženým odpružením předních a zadních kol, "Pegaz" je kočárek pro děti a teenagery do hmotnosti 40 kg. Výrobek je vybaven řadou doplňků zlepšujících funkčnost a komfort používání, jako jsou: zužující vložky, stůl, bezpečnostní pásy, klín, kapuce, moskytiéra, spací pytel, nákupní taška atd.

Speciální zdravotní kočárek "Pegaz" je zdravotnický prostředek třídy I určený pro osoby se zdravotním postižením, které kvůli svému stavu nemohou sami chodit a/nebo se posadit. Výrobek je určen pro přepravu a přemísťování výše uvedených osob v sedě a toto je jeho zamýšlené použití.

Mezi klinické indikace patří dětská mozková obrna, meningeální kýla, dystrofie, parézy atd.

Výrobek je určen pro uživatele od 80-140 cm. Uživatelé nemohou kočárek řídit sami, ale pouze s pomocí doprovodu. Kočárek lze použít v interiéru i exteriéru, na různé povrchy (asfalt, beton, kámen, šterk) a za různých povětrnostních podmínek. Jakékoli jiné použití výrobku, než je popsáno, je zakázáno. Výrobek by měl být používán v souladu s doporučením ošetřujícího lékaře nebo fyzioterapeuta. Kočárek musí být v návodu k použití používán pouze dospělými osobami, které dohlíží na uživatele. Dospívající a děti, stejně jako jakékoli jiné osoby bez příslušného školení, by neměly výrobek používat.

Kontraindikace:


V případě kontraindikací polohy v sedu ,případně pasivní vzpřímené polohy je nutné nastavení kočárku konzultovat s fyzioterapeutem nebo ošetřujícím lékařem.

2. Základní informace o kočárku Pegaz

- Zdravotní kočárek Pegaz má mnoho možností, například:
- • nastavení sklonu opěradla viz bod 9.11
- • nastavení hloubky sedadla.....viz bod 9.9
- • nastavení výšky opěradla - prodloužení viz bod 9.10
- • nastavení opěrky nohou viz odstavec 9.8
- • zužující vložky viz bod 11.5
- • doplňkové vybavení viz bod 11

3. Rychlý start

Výhodou speciálního kočárku Pegaz je snadné použití a skladnost. Lze jej připravit k použití v několika jednoduchých krocích (obr. 3.1)

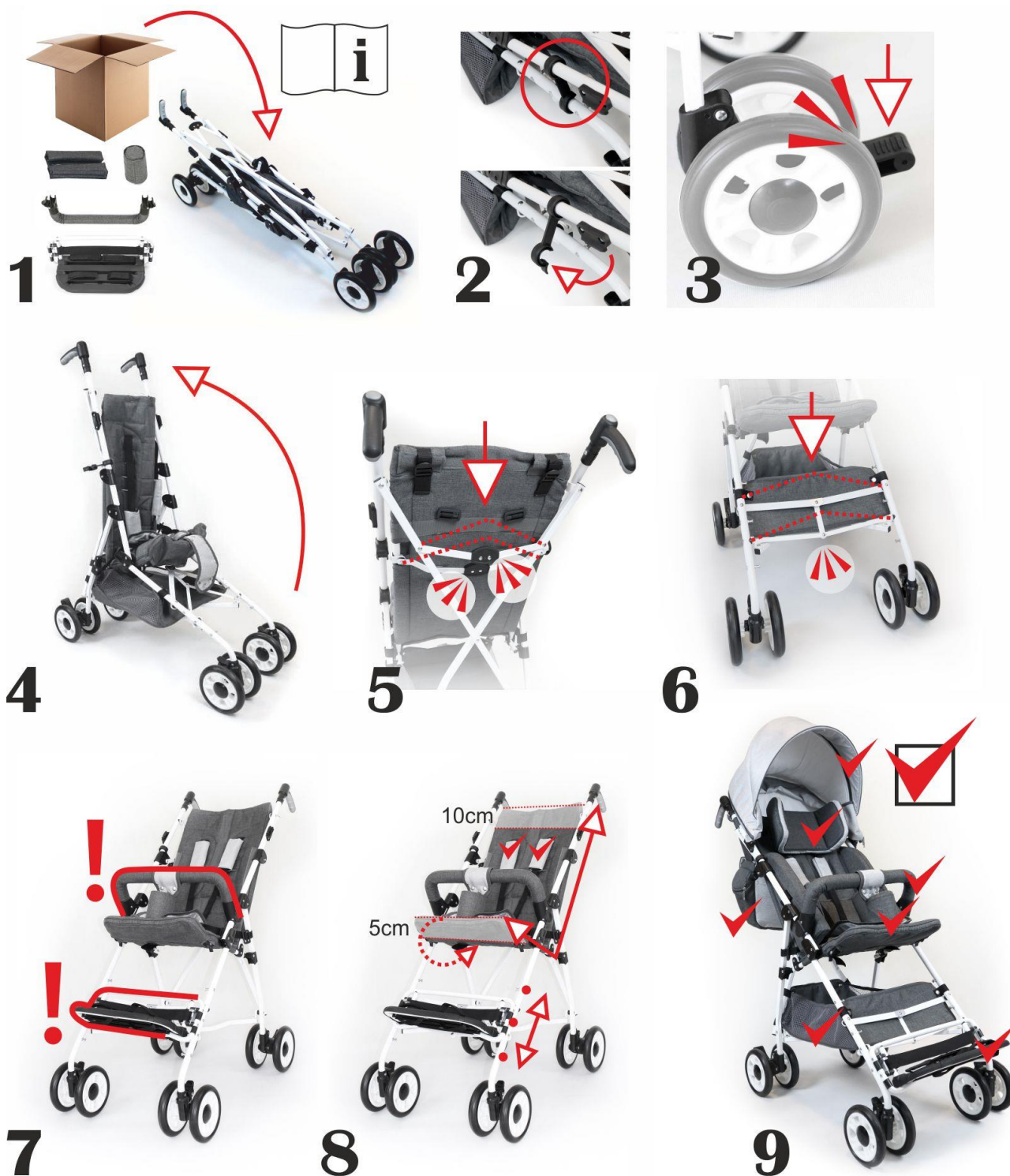

Obr. 3.1

▪ Bezpečnost

4. Důležité rady a bezpečnostní pravidla

- Pravidlaj je zakázáno používat kočárek způsobem, pro který není určen
- Produkt Výrobek obsahuje malé části, které mohou být při požití pro dítě nebezpečné !
- Vzhledem k velkým možnostem nastavení kočárku při úhlovém nastavení sedadla a úhlovém nastavení opěradla, je možné nastavit polohu, ve které se ocitne hlava pod pánevní linií. Je zakázáno používat takovéto nastavení, jenž by mohlo vést k riziku zadušení ,nebo udušení dítěte.
- Je zakázáno klást na kočárek jakékoli další závaží, což se zejména týká položení další zátěže na zadní stranu opěradla, například batohu nebo tašky. Může to způsobit převrácení kočárku Mewa a může dojít ke zranění uživatele! Toto se nevztahuje na originální a další příslušenství určené pro kočárek Mewa nepřekračující povolené hodnoty zatížení. Všechny další prvky připevněné ke kočárku ovlivňují jeho stabilitu!
- POZOR! V závislosti na provedených úpravách zdravotního kočárku Mewa - týkající se nastavení rukojeti pro tlačení kočárku, nastavení výšky opěradla, úhlového nastavení opěradla, nastavení hloubky sedadla, úhlového nastavení sedadla, nastavení úhlu opěrky nohou a nastavení opěrky nohou - je možné že kočárek může překročit doporučené maximální rozměry.
- POZOR! Při každém použití zdravotního kočárku postupujte podle pokynů uvedených níže. V případě jakýchkoli pochybností nesmí být kočárek používán. V takovém případě se doporučuje urgentně kontaktovat prodejce a nebo výrobce o radu.
- POZOR! Při jízdě dveřmi nebo podobnými zúženími, která omezují průjezdnost kočárku, se ujistěte že na obou stranách kočárku je dostatečný prostor, a je tak zabráněno zachycení rukou, nebo jiných částí těla a nemůže dojít k poškození kočárku.

VAROVÁNÍ!



- Nikdy nenechávejte své dítě v kočárku bez dozoru, toto by mohlo být nebezpečné !
- Tento výrobek není vhodný pro běh, bruslení nebo in-line brusle.
- Zdravotní kočárek není určen k použití jako autosedačka v motorovém vozidle.
- Dávejte pozor na mezery a pohyblivé části - nebezpečí uskřípnutí..
- Nepřenášejte kočárek s dítětem..
- Kočárek je dodáván k kartonu. Karton není určen ke hraní. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí. Nenasazujte na hlavu. Nebezpečí udušení!

-
- POZOR! Je zakázáno používat kočárek, pokud je technický stav kočárku, nebo některá jeho součást vadná, nebo má uživatel o tom jakékoli pochybnosti, kočárek je jakkoli poškozený, nebo existuje pouze podezření na poškození ,nebo kočárek nefunguje správně. V takové situaci se doporučuje neprodleně kontaktovat prodejce a nebo výrobce s žádostí o radu.

5. Tabulky

5.1 Typový štítek

- Na Na typovém štítku jsou základní informace o produktu: název, model, sériové číslo (identifikační), maximální nosnost, datum výroby, potvrzení shody produktu pro zdravotnické prostředky, upozornění o souladu s příručkou pro provoz a údržbu, potvrzení, že jde o zdravotnický prostředek a údaje výrobce (obr. 5.1.)
- Štítek upozornění je umístěn na rámu příčně v zadní části rámu kočárku, na jeho levé straně připevněný nahoře.



Obr. 5.1

5.2 Štítek s kódem UDI


Štítek s UDI kódem obsahuje informace o produktu: název, model, UDI kód a údaje výrobce (Obr. 5.2)



Obr. 5.2

6. Výstražné tabule

- Důležité informace jsou uvedeny na varovném štítku varování pro uživatele (viz obr. 6.1)
- Na zadní / boční straně je výstražný štítek části rámu, na obou stranách.

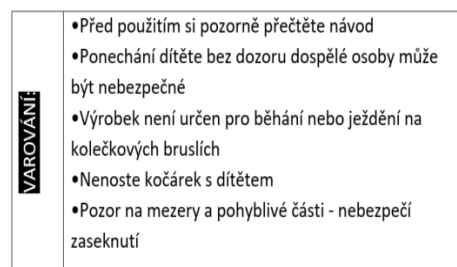

Obr. 6.1

7. Použité symboly

	Sériové číslo produktu		Název výrobce
	Celková přípustná hmotnost uživatele		Dotyčný výrobek je zdravotnickým prostředkem
	Datum výroby		POPIS „ VAROVÁNÍ! “ a symbol v této příručce slouží k posílení pozornosti čtenáře k obsahu označenému tímto symbolem. Nedodržení obsahu označeného tímto opisem může představovat ohrožení zdraví a bezpečnosti uživatele a doprovodných osob a může také poškodit produkt.
	Značka shody podle směrnice o zdravotnických prostředcích		
	Varování, abyste držovali příručku pro používání a údržbu produktu		

■ Produkt

8. Obecná konstrukce kočárku

Speciální zdravotní kočárek Pegaz se skládá z jedné části - rámu s opěradlem a sedáku, které jsou jeho nedílnou součástí. Kočárek má navíc širokou škálu doplňkového vybavení, které lze vybrat podle individuálních potřeb uživatele.



- | | | |
|-----|--|-------------------|
| 1- | Ergonomické rukojeti | viz bod 9.7 |
| 2- | Mechanismus nastavení výšky opěradla | viz část 9.10 |
| 3- | Mechanismus nastavení sklonu opěradla | viz odstavec 9.11 |
| 4- | Transportní zámek | viz bod 10.2 |
| 5- | Čalounění | |
| 6- | Nákupní košík | viz bod 10.4 |
| 7- | Nezávislé brzdy na zadních kolech | viz bod 9.4 |
| 8- | Systém odpružení čtyř kol | viz bod 9.5 |
| 9- | Zámek řízení předních otočných kol | viz bod 9.3 |
| 10- | Sada 4 dvojité pevných gelových kol | viz bod 9.3 a 9.4 |
| 11- | Nastavitelná, odnímatelná opěrka nohou | viz bod 9.8 |
| 12- | Mechanismus nastavení hloubky sedáku | viz bod 9.9 |
| 13- | Abdukční a stabilizační pásy * | viz bod 10.6 |
| 14- | Klín * | viz bod 10.5 |
| 15- | Bezpečnostní zábrana | viz bod 10.3 |
| 16- | Pětibodové pásy | viz bod 10.1 |

*) volitelné doplňky dostupné jako standardní vybavení

- | | | |
|-----|---------------------------------|---------------|
| 17- | Turistická taška | viz bod 11.6 |
| 18- | Nánožník | viz bod 11.9 |
| 19- | Zužovací vložky | viz bod 11.5 |
| 20- | Podhlavník | viz bod 11.4 |
| 21- | Slunečník | viz bod 11.10 |
| 22- | Nastavitelná stříška s okenkém, | viz bod 11.1 |
| 23- | Pláštěnka | viz bod 11.7 |
| 24- | Moskytiéra | viz bod 11.8 |
| 25- | Bederní polštář | viz část 11.3 |
| 26- | Terapeutický stolek | viz bod 11.2 |



9. Konfigurace a použití - rám kočárku

9.1. Konfigurace a použití - rám kočárku.

Než začnete kočárek Pegaz rozkládat, ujistěte se, že všechna čtyři kola spočívají na zemi. Chcete-li kočárek rozložit, nejprve odstraňte přepravní zámek umístěný na boku kočárku. Poté uchopte madla a zvedněte horní část opěradla a jemně posuňte madla směrem ven. Dalším krokem je vyztužení konstrukce kočárku snížením rozpěrek. Jsou umístěny v přední části kočárku ve výšce nákupního košíku a v zadní části kočárku za opěrkou. Pevně jej zatlačte dolů, dokud nedosáhnou horizontální police.

9.2. Skládání kočárku.

Pro sestavení kočárku odstraňte veškeré příslušenství kočárku. Dále zatlačte rozpěrky umístěné mezi předními koly ve výšce nákupního košíku (obr. 9.1.2) a v zadní části kočárku za opěradlo (obr. 9.1.3). Dalším krokem je posunutí rukojetí co nejvíce k sobě (obr. 9.1.4) a tlačení horní části kočárku dopředu a dolů (obr. 9.1.5). To způsobí, že se kočárek složí. Zajistěte přepravní pojistku (obr. 9.1.6) umístěnou na boku kočárku.



Obr. 9.2.1
Výchozí poloha



Obr. 9.2.2
Zvedání spodní polohy



Obr. 9.2.3
Zvedání horní polohy



Obr. 9.2.4
Stažení rukojetí



Obr. 9.2.5
Složení kočárku



Obr. 9.2.6
Zavření přepravní pojistky

9.3. Přední dvojítá otočná kola. Blokování směru jízdy předních kol

Přední kola jsou nedílnou součástí rámu a lze je pro výměnu demontovat.

- **Zámek pro blokování směru jízdy.** V případě jízdy po nerovném povrchu, nutnosti pohybu na svazích, překonávání prahů nebo obrubníků se doporučuje zajistit blokování protáčení předních kol. Chcete-li zablokovat funkci otáčení předních kol, zvedněte tlačítko umístěné mezi předními koly (obr. 9.3.1). Aby bylo možné tlačítko znovu zapnout, musí být přední část posunuta dolů (obr. 9.3.2) a blokáda by měla být umístěna do drážky.



Obr. 9.3.1

Zámek kol je zapnutý

Obr. 9.3.2

Zámek kol uvolněn

9.4. Zadní dvojítá kola. Nezávislý brzdový systém

Zadní kola jsou nedílnou součástí rámu a lze je pro výměnu demontovat.

- **Nezávislý brzdový systém.** Zadní kola jsou vybavena dvěma nezávislými brzdami umístěnými na jejich zadní části. Chcete-li zabrzdit, přesuňte tlačítka obou kol dolů (obr. 9.4.1). Pro odblokování brzd přesuňte tlačítka obou kol nahoru (obr. 9.4.2).



Obr. 9.4.1

Zatažena brzda kol

Obr. 9.4.2

Uvolněná brzda kol

Obr. 9.5.

Systém odpružení kol

9.5. Systém odpružení všech čtyř dvojítých kol

Všechna čtyři kola kočárku Pegaz jsou vybavena systémem odpružení. Je automatické a nemělo by se nastavovat. (obr. 9.5).

9.6. Sklopná noha

Kočárek Pegaz lze vybavit sklopnou nohou, která je součástí příplatkové výbavy.


Sklápěcí noha usnadňuje manévrování s kočárkem v případě, že narazíte na malé překážky, jako jsou schody, obrubníky. Chcete-li přední kola zvednout, stiskněte nohu na sklopné noze a současně přitáhněte rukojeti k sobě.



Obr. 9.6.
Sklopná noh

9.7. Nastavitelné, ergonomické rukojeti pro tlačení kočárku

Kočárek Pegaz je vybaven nastavitelnými madly pro tlačení. Chcete-li změnit úhel jejich nastavení, stiskněte tlačítka na jejich koncích a jejich otáčením změňte úhel jejich sklonu (obr. 9.7.1 a 9.7.2). Poté, co je rukojeť v požadované poloze, uvolněte tlak. Rukojeti lze měnit každých 90 stupňů.

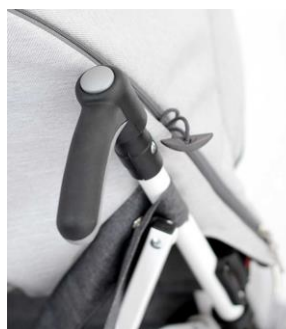

Obr. 9.7.1
Rukojeť - poloha a



Obr. 9.7.2
Rukojeť - poloha b

9.8. Podnožka. Regulace a použití.

- **Montáž.** Chcete-li nainstalovat stupačku, nasuňte ji kolmo přes montážní šrouby ve spodní části rámu v několika výškových úrovních. Cvaknutí signalizuje, že jsou zajišťovací háčky zajištěny. Po instalaci opěrky nohou se ujistěte, že je správně připevněna. Chcete-li to zkontrolovat, energicky vytáhněte opěrku nohou nahoru - když je správně vložena, měla by zůstat na místě.

- **Demontáž.** Chcete-li stupačku demontovat, stiskněte současně dvě tlačítka pro uvolnění háčků po stranách stupačky a zvedněte vyháčený prvek. Je zakázáno používat kočárek bez opěrky nohou

- **Použití podnožky.** Podnožku se doporučuje nastavit do takové výšky, aby na ní mohly nohy dítěte volně spočívat celou svou plochou a zároveň stehna dítěte byla rovnoběžná s rovinou sedáku (obr. 9.8.1 a 9.8. 2). V nánožníku jsou pásy pro zajištění nohou dítěte. Doporučuje se je nasadit při používání kočárku. Standardně je podnožka ve vodorovné poloze. Během přepravy, skladování, rehabilitace, nastupování a vystupování z zdravotního kočárku Pegaz je však nutné odstranit podnožku



Obr. 9.8.1
Minimální poloha



Obr. 9.8.2
Maximální poloha

9.9. Nastavení hloubky sezení

Kočárek Pegaz má funkci nastavení hloubky sedáku. Díky možnosti odklopení jeho přední části můžeme prodloužit sedací plochu o 5 cm. Chcete-li to provést, stiskněte současně tlačítka umístěná po stranách přední části sedačky a ohněte nastavitelný prvek tak, abyste získali polohu hlavní části sedačky (obr. 9.9.1). Pro sklopení sedáku stiskněte současně tlačítka umístěná po stranách přední části sedáku a ohněte nastavitelný prvek směrem dolů nebo pod hlavní část sedáku (obr. 9.9.2).



Obr. 9.9.1

Nastavení hloubky sedáku – minimální



Obr. 9.9.2

Nastavení hloubky sedáku - max

9.10. Nastavení výšky opěradla

Kočárek Pegaz má funkci nastavení výšky opěradla (obr. 9.10.1). Díky možnosti instalace kovových nástavců na horní část zádivé opěrky můžeme zádivou opěrku prodloužit o 10cm. K tomu odepněte horní prvek čalounění zádivé opěrky, vložte nástavce (obr. 9.10.2) do otvorů trubek zádivé opěrky a horní prvek čalounění opět upevněte.



Obr. 9.10.1

Nastavení výšky opěradla max/min



Obr. 9.10.2

Prodloužení

9.11. Nastavení sklonu opěradla

Kočárek Pegaz má funkci dvoustupňového nastavení úhlu zádové opěrky (obr. 10.11.1 a 10.11.5).

Pro jeho nastavení uvolněte rozpěrku umístěnou přímo za opěradlem zvednutím (obr. 10.11.3), posuňte úchyty opěradla po stranách rámu směrem dolů a sklopte opěradlo ze základní polohy do sklopené polohy (obr. 10.11.4). Pro zajištění sklopené polohy zablokujte rozpěrku opět jejím spuštěním dolů a stisknutím (obr. 10.11.5).




Obr. 10.11.1

Úhel sklonu opěradla - základní poloha




Obr. 10.11.2

Úhel opěradla - při rozložení

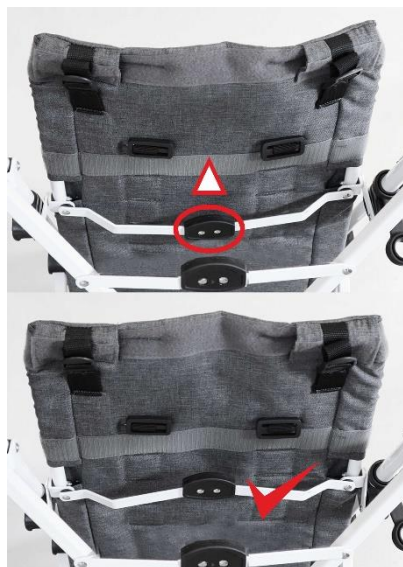

Obr. 10.11.3

Uvolnění opěradla

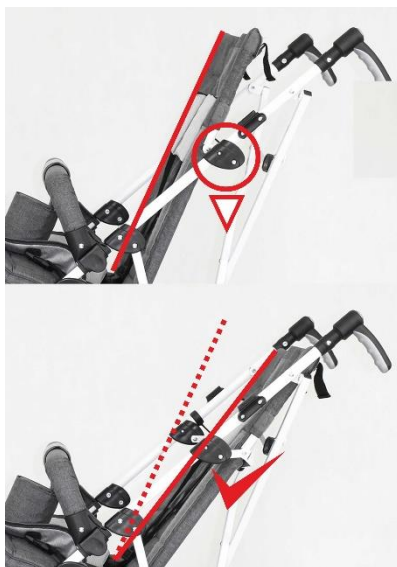

Obr. 10.11.4

Spusťte úchyty opěradla a sklopte opěradlo



Obr. 10.11.5

Správně zamčene rozpěrka

10. Standardní výbava

10.1 Pětibodové pásy

Zdravotní kočárek Pegaz je standardně vybaven profesionálními, pětibodovými bezpečnostními pásy s nastavením (obr. 10.1.1).



Obr. 10.1.1

Nastavení pásů – minimum



Obr. 10.1.2

Nastavení pásů – maximum

- **Regulace.** Před nasazením pětibodových bezpečnostních pásů na své dítě upravte. Chcete-li upravit délku popruhů, posuňte seřizovací prvky na postroji nahoru nebo dolů a odpovídajícím způsobem posuňte podložky (obr. 10.1.1 a 10.1.2). Pro nastavení výšky upevnění popruhů k zádové opěrci přepněte zapínání postrojů z nízkého zapínání na vysoké nebo naopak.
- **Použití.** Pro nasazení pětibodového bezpečnostního pásu dítěte nasadte dětský pás na pravou a levou stranu a poté oba pásy připevněte k přezce pásu, která je připevněna k sedačce. Pro sejmutí pětibodového pásu z dítěte stiskněte tlačítko na přezce a odepněte oba popruhy ze spony, poté popruh pomalu stáhněte z pravé a levé strany dítěte. Pokaždé, když změníte úhel opěradla, musíte upravit jeho délku.



Obr. 10.2

Doprávní uzavěr

10.2 Doprávní uzavěr

Kočárek Pegaz je vybaven přepravní pojistkou, která zabraňuje rozložení rámu při přepravě a přepravě (obr. 10.2).

Přepravní pojistka by měla být nasazena při skládání rámu a odstraněna při rozkládání rámu. Rám kočárku nerozkládejte, pokud je na místě blokáda, protože by mohlo dojít k poškození prvku nebo poškození konstrukce rámu kočárku.

10.3 Bezpečnostní zábrana



Obr. 10.3

Barierka zabezpieczająca

Standardní výbava kočárku Pegaz je vybavena bezpečnostní zábranou, která má za úkol zabránit vypadnutí dítěte z kočárku (obr. 10.3). Bezpečnostní zábrana se používá střídavě s terapeutickým stolem (součástí doplňkové výbavy) a je základním konstrukčním prvkem kočárku.

- **Montáž.** Prvky by měly být namontovány na rám kočárku pomocí plastových západek, které vypadají u obou prvků stejně. Po umístění prvku do vhodné výšky utáhněte západky tak, aby zcela objímaly rám..

- **VAROVÁNÍ!** Vzhledem ke konstrukci musí mít Bezpečnostní zábrana.

10.4 Nákupní košík

Nákupní košík je součástí standardní výbavy kočárku Pegaz (obr. 10.4). Nachází se těsně pod sedadlem. Jeho maximální nosnost je 2 kg.



Obr. 10.4

Nákupní košík

10.5 Klín

Kočárek je vybaven klínem, který by měl být po umístění dítěte do kočárku mezi jeho nohy. Pro instalaci klínu jej upevněte suchým zipem na přední nebo zadní stranu zástěry (obr. 10.5.1 a obr. 10.5.2) a poté jej omotejte páskou pro zpevnění.



Obr. 10.5.1

Klín - poloha max



Obr. 10.5.2

Klín - poloha min

10.6 Únosné a stabilizační pásy

Abdukčně-stabilizační pásy slouží k další stabilizaci pánve a zabránění vyklouznutí dítěte z kočárku (obr. 10.6). Správný způsob jejich použití je upnout je na stehna dítěte tak, aby se pánev opírala co nejbližší k opěrce zad. Zajistíte tak zdravější a pohodlnější polohu vašeho miminka v kočárku.

- **Regulace.** Chcete-li upravit délku popruhů stabilizujících abdukci, posuňte seřizovací prvky na předních popruhech popruhů nahoru nebo dolů.
- **Použití.** Pro nasazení dítěte na abdukčně-stabilizační pásy umístěte dítě na nainstalované pásy, poté omotejte nohu dítěte a zapněte obě přezky pásu na oba přední popruhy. Chcete-li z dítěte sundat abdukčně-stabilizační pásy, rozepte obě přezky pásu na předních pásech.



Obr. 10.6

Pasy odwodząco - stabilizujące

11. Doplnkové vybavení

11.1 Nastavitelná stříška s okénkem.

Zdravotní kočárek Pegaz může být vybaven nastavitelnou stříškou s okénkem, která pomáhá chránit dítě před sluncem nebo deštěm (obr. 11.1.1). Prvky stříšky jsou: rám (přední a zadní oblouk), mechanismus pro nastavení otevírání kapoty (pravá a levá), dvě západky s červenými tlačítky, které připevňují stříšku k rámu, čalounění stříšky a okénko moskytiéra se zipem.

Montáž. Prvek fixující nastavitelnou stříšku s okénkem jsou dva plastové prvky umístěné na vnějších stranách horní části rámu ve výšce opěrky hlavy.

Pro sestavení nastavitelné kabiny s oknem nastavte opěradlo do svislé polohy a poté současně zasuňte oba západky stříšky do úchytů na rámu. Budka s okénkem se instaluje tak, že zadní část čalounění budky překrývá zadovou opěrku kočárku..

- **Demontáž.** Chcete-li demontovat nastavitelnou stříšku s okénkem, stiskněte dvě červená tlačítka na sponách zajišťujících stříšku a poté kapuce vysuňte z upevnění na rámu.



Obr. 11.1.1

Stříška - nastavení max.

- **Použití.** Chcete-li změnit velikost stříšky s oknem, uchopte přední oblouk a zadní oblouk rámu stříšky a nastavte na požadovanou polohu přiblížením, nebo přiblížením obou oblouků k sobě. Mechanismus pro nastavení velikosti povrchu kabiny se automaticky uzamkne. Stříška má odnímatelné okno s moskytiérou zajišťující volnou cirkulaci vzduchu. Okno se otevírá a zavírá zipem.



Obr. 11.1.2

Stříška - nastavení min.

11.2 Terapeutický stolek

Kočárek Pegaz lze vybavit protiskluzovým terapeutickým stolem, jehož maximální zatížení je 3 kg (Obr. 11.2).

Chcete-li sestavit stůl, nasuňte otevřené upevňovací svorky na hlavní rámový prvek a poté je utáhněte, dokud nebudou zcela uzavřeny. Silným zatažením se ujistěte, že je bezpečně upevněn - stůl by měl zůstat na svém místě. Chcete-li stůl rozebrat, uvolněte upevňovací svorky a sejměte stůl z rámu kočárku. Terapeutický stůl se používá střídavě s bezpečnostním zábradlím a je základním konstrukčním prvkem kočárku.

VAROVÁNÍ! Kvůli konstrukci musí mít kočárek podnožku a zábranu nebo terapeutický stolek.



Obr. 11.2

Terapeutický stolek

11.3 Polštář na bederní páteř

Bederní polštářek je prvkem doplňkové výbavy zvyšující komfort používání kočárku změkčením zádové opěrky v bederní oblasti (obr. 11.3). Polštář se instaluje připevněním k opěrce pomocí suchého zipu.

11.4 Podhlavník

Podhlavník je příslušenství (obr. 11.4). Plní jak změkčující, tak stabilizační funkci. Pro nastavení výšky opěrky hlavy připevněte opěrku hlavy suchým zipem na správnou výšku opěrky a poté pro lepší stabilizaci provlékněte otvory na suchý zip a upevněte ji za opěrku.

11.5 Zužující vložky

Kočárek Pegaz je vybaven dvěma zužujícími vložkami. Slouží k nastavení vnitřních rozměrů šířky sedáku (obr. 11.5). Vložky se montují tak, že se přilepí nejdelší svislou hranou k vnějším okrajům opěradla a páskem na suchý zip k bočním prvkům rámu kočárku.



Obr. 11.3

Polštář na bederní páteř



Obr. 11.4

Podhlavník



Obr. 11.5

Zužující vložky

11.6 Turistická taška

Velká a elegantní cestovní taška je upevněna na dvou držadlech umístěných na vnitřní straně madla (obr. 11.6). Maximální nosnost tašky je 2 kg.

VAROVÁNÍ! Překročení maximálního zatížení tašky má negativní dopad na stabilitu kočárku a může být nebezpečné pro dítě i ostatní osoby, které jej používají!

11.7 Pláštěnka

Zdravotní kočárek Pegaz může být vybaven pláštěnkou, která pomáhá chránit dítě před vlhkostí (obr. 11.7). Toto příslušenství vyžaduje montáž na další příslušenství - nastavitelnou stříšku s oknem.

Montáž. Pro instalaci pláštěnky ji nasadte na vršek celé stavitelné kabinky s okénkem a následně fólií zakryjte sedák kočárku a stupačku. Poté, co se ujistíte, že je fólie rovnoměrně nasazena, připevněte ji k rámu a opěrce nohou - v závislosti na umístění spojovacího prvku.



Obr. 11.6
Turistická taška

11.8 Moskytiéra

Zdravotní kočárek Pegaz lze vybavit moskytiérou, která znesnadňuje přímý kontakt hmyzu s dítětem (foto 11.8). Toto příslušenství vyžaduje montáž na další příslušenství - nastavitelnou stříšku s oknem.

Montáž. Pro instalaci moskytiéry ji nasadte na vršek celé nastavitelné budky s okénkem a poté sítkou zakryjte sedák kočárku a opěrku nohou. Poté, co se ujistíte, že je síť rovnoměrně nanесena, připevněte ji k rámu a opěrce nohou - v závislosti na umístění upevňovacího prvku.

11.9 Nánožník

Zdravotní kočárek Pegaz lze vybavit nánožníkem pro zvýšení pohodlí dítěte v chladnějších dnech (obr. 11.9). Toto zařízení vyžaduje instalaci ochranného zábradlí.

Instalace. Aby bylo možné nánožník sestavit na nohy, nasadte jej zespodu na stupačku a shora prostrčte bezpečnostní lištou a připevněte patentkami na rám kočárku.

11.10 Slunečník

Zdravotní kočárek Pegaz může být vybaven sluneční clonou, která pomáhá chránit vaše dítě před sluncem (obr. 11.10).

Instalace. Chcete-li deštník nainstalovat na kočárek, uvolněte svorku odšroubováním závitu na straně, poté jej nasuňte a ujistěte se, že gumová podložka zůstane na svém místě. Po zvolení požadované výšky utáhněte závit, dokud svorka nezapadne na rám kočárku.



Obr. 11.7
Plášťenka



Obr. 11.8
Moskytiéra



Obr. 11.9
Nánožník



Obr. 11.10
Slunečník

12. Technická specifikace kočárku Pegaz

délka kočárku	90 - 108 cm
šířka kočárku	56 cm
výška kočárku	106 - 130 cm
celková hmotnost	10kg - 19,6kg
efektivní hloubka sedu	25 / 33 cm
šířka sedadla	30* / 38 cm
výška opěradla	50 / 60 cm
šířka opěradla	30* / 37 cm
vzdálenost stupačky od sedáku / počet seřízení	20, 30, 40 cm / 3 položky
délka kočárku, složeného pro přepravu	124 cm
šířka kočárku ve složeného pro přepravu	28 cm
výška kočárku, složeného pro přepravu	39 cm
kapacita koše	2 kg
nosnost tašky	2 kg
max. hmotnost pacienta	40 kg
výška pacienta	80-140 cm
úhel roviny sedadla / počet seřízení	25° / 1 položky
úhel opěradla / počet nastavení	22° i 34° / 2 položky
úhel / množství nastavení	75° / 1 položky

POZNÁMKY: *) hodnoty zobrazené s vložkami

Tolerance naměřené hodnoty +/- 20 mm, +/- 1,5 kg, +/- 1°.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny technických parametrů.

12.1 Použité materiály

Ocel a hliník s práškovým nástřikem, 100% polyesterové tkaniny a plast (PP, PVC, ABS, PA, PE, PU).

13. Dodávka a nářadí

Zdravotní kočárek Pegaz je dodáván v kartonu a předmontovaný. Originální balení by mělo obsahovat následující položky:

- Složený rám kočárku s integrovaným sedákem, opěradlem a kolečky, podnožkou, bezpečnostním zábradlím a klínem * nebo abdukčně stabilizačními pásy * (dle objednávky)
- Další vybavení (dle objednávky)
- Uživatelská příručka se záručním listem

Před použitím zkontrolujte a ujistěte se, že přijatý karton obsahuje všechny prvky a že žádný z nich nebyl poškozen, např. Pokud se zjistí, že v přijatém kartonu chybí nějaká položka nebo je některá položka poškozena, kontaktujte prosím prodejce a nebo výrobce za účelem získání chybějících položek nebo výměny produktu za nový, plně kompletní a funkční.

Multifunkčnost a rozsáhlá výbava kočárku Pegaz umožňuje přizpůsobení kočárku osobním požadavkům uživatele. Za tímto účelem si před použitím pečlivě přečtěte celý návod.

K montáži a demontáži zdravotního kočárku Pegaz není potřeba žádné nářadí.

14. Montáž a demontáž kočárku

• Montáž kočárku

Výrobek je zabalen v původním kartonu a je již předem smontován. Dokončete montáž provedením následujících kroků:

- rozložte rám kočárku úpravou parametrů:
- snížit a zpevnit rozpěrky ve výšce opěradla v zadní části kočárku a ve výšce nákupního košíku v přední části kočárku
- aktivace / deaktivace uzamčení směru jízdy předních kol
- nastavte výšku a úhel rukojeti
- nastavit úhel sklonu opěradla
- upravte délku pětibodových pásů
- nastavte opěrku nohou do požadované výšky
- nasadit bezpečnostní zábranu nebo terapeutický stůl
- nainstalujte příslušné zařízení a upravte parametry, například:
 - o umístěte zužující vložky
 - o vyjměte/nainstalujte prodloužení opěradla
 - o nastavte hloubku sedáku
 - o upravit abdukčně-stabilizační pásy
 - o upravit stříšku s okýnkem
 - o nasadit a upravit klín
 - o nasadit cestovní tašku
 - o pro nastavení nákupního košíku
 - o oblékněte si vybrané prvky výbavy věnované ročním obdobím:
 - nánožník
 - moskytiéra
 - pláštěnka
 - deštník

• Demontáž kočárku

- a) Chcete-li kočárek rozebrat:
- b) Odstraňte příslušenství
- c) Odstraňte opěrku nohou
- d) Demontujte bezpečnostní zábranu / terapeutický stůl
- e) Zablokujte přední kola
- f) Přibrzděte zadní kola
- g) Zvedněte rozpěrky ve výšce opěradla v zadní části kočárku a ve výšce nákupního košíku v přední části kočárku
- h) Složte kočárek a zajistěte jej přepravní pojistkou

15. Příprava k použití

Před použitím kočárku je nutné:

Zkontrolujte, zda je kočárek a všechny jeho prvky v dobrém technickém stavu, a pokud je technický stav kočárku, nebo jeho jednotlivých prvků špatný nebo o tom má uživatel pochybnosti, pak se kočárek nesmí používat. Kontaktujte prosím prodejce a nebo výrobce.

Zkontrolujte, zda byl rám kočárku správně rozložen a že skládací mechanismus rámu byl správně uzavřen (uzamčen).

Zkontrolujte správnou instalaci všech čtyř kol. A zda je běhoun na všech čtyřech kolech v dobrém stavu.

Zkontrolujte, zda brzdy fungují správně a zatáhněte je.

Správně proveďte všechna nastavení a přizpůsobte kočárek potřebám dítěte, včetně nastavení vhodné hloubky terapeutického sedáku a výšky zádové opěrky, vhodného sklonu zádové opěrky, nastavte vhodnou úroveň opěrky nohou, nastavte vhodnou délku pětibodové pásy. Zkontrolujte, zda jsou všechna nastavení správně usazena a zajištěna.

Zkontrolujte, zda je čalounění kočárku suché.

Zajistěte dítě všemi dostupnými stabilizačními prvky, jako jsou: pětibodové pásy, zužující vložky, abdukčně-stabilizační pásy, klín, podnožka, pásky na podnožku, bezpečnostní zábrana nebo terapeutický stůl. Je to proto, aby se zabránilo vypadnutí a vyklouznutí dítěte z kočárku a aby se zabránilo pádu nohou dítěte z opěrky nohou. Ujistěte se, že všechny úpravy provedené dříve jsou vhodné a bezpečné pro dítě.

Ujistěte se, že dítě není umístěno v kočárku bez oblečení, které chrání tělo v místech kontaktu s potahem kočárku. Je to proto, aby nedocházelo k odírání dětského těla a aby byla pamatována na hygienu dítěte.

U dětí, které mají problémy s inkontinencí, by měla být na sedačku kočárku umístěna speciální utěrka, kterou lze zakoupit v lékárnách nebo zdravotnických prodejnách.

Při použití jakýchkoliv doplňkových pomůcek, jako jsou nafukovací hadičky, drény, vaky, katétrů apod., zajistěte, aby byly dobře chráněny proti vypadnutí, vytržení, utažení a aby nepřekážely při používání kočárku.

16. Použití kočárku

16.1 Přemísťování kočárku

Nejlepší způsob, jak přemístit zdravotní kočárek, je řídit jej pomocí kol. V případech, kdy to není možné (např. při přepravě zdravotního kočárku v autě), lze z bezpečnostních důvodů kočárek po vyjmutí příslušenství zvednout a přenášet oběma rukama, aby se snížila přepravovaná hmotnost a složit jej.

Při přemísťování nebo zvedání rámu kočárku buďte mimořádně opatrní. Rám by se měl pohybovat ve složeném stavu a na přepravním zámku a držet jej za pevný prvek rámu.

Z bezpečnostních důvodů nezvedejte rozložený kočárek s vybavením, mohlo by dojít k poškození kočárku.

Kočárek nezvedejte za opěrku nohou nebo nárazník, terapeutický stůl nebo jiné zařízení, protože by mohlo dojít k poškození výrobku a ohrožení bezpečnosti ostatních lidí ve vašem okolí.

16.2 Nastupování a vystupování z zdravotního kočárku

Při nastupování a vystupování z kočárku umístěte kočárek co nejbližší stabilnímu a bezpečnému místu, kam se uživatel přesune. Poté, co se ujistíte, že jsou zabrzděny zadní brzdy a že stupačka byla odstraněna, aby se na ní nestoupalo, může být uživatel umístěn na zdravotní kočárek.

Nestoupejte na podnožku, protože hrozí nebezpečí převrácení kočárku, zranění uživatele a poškození výrobku.

Dbejte na to, aby při nastupování nebo vystupování z kočárku dítě ani žádná jiná osoba nestála na opěrce nohou, protože by ji mohlo poškodit a zranit uživatele!

16.3 Správná poloha na zdravotním kočárku

Z bezpečnostních a zdravotních důvodů se doporučuje, aby uživatel měl pánev a záda co nejbližší k zadové opěrce, aby byla páteři rovnoměrná opora (optimální opora pro všechny části páteře, aby nevznikal volný prostor).

Stehna by měla být po celé délce podepřena co největší plochou, čehož dosáhneme nastavením hloubky sedáku voyíku, chodidla by měla být opřena o nánožník, který zabraňuje klouzání, udržuje optimální napětí svalů nohou a přenáší část hmotnosti z vyšších částí těla.

16.4 Jízda na zdravotním kočárku

Při používání vždy držte zdravotní kočárek za rukojeti, abyste zabránili inertnímu pohybu kočárku. Uvolněte zadní brzdy při současném držení rukojeti a zatlačte zdravotní kočárek požadovaným směrem.

16.5 Pohyb na svazích

Při jízdě do kopce nebo z kopce vždy používejte zdravotní kočárek otočený po směru jízdy. Ovládejte svou rychlost na svazích a pohybujte se co nejpomaleji. Osoba, která kočárek obsluhuje, musí mít dostatečnou sílu k ovládání stability kočárku.

Vždy pamatujte na to, že těžiště kočárku se změní, když bude překonávat nerovnosti nebo svahy na zemi. V tomto případě buďte maximálně opatrní a kočárek zajistěte.

Při používání ramp se ujistěte, že je rampa vhodná, že kola zdravotního kočárku jsou dostatečně vysoká na překonání rampy, že se rám kočárku nedotýká rampy a že by měla být zajištěna druhá osoba, protože je zde nebezpečí převrácení zdravotního kočárku, poškození výrobku a zranění uživatele.

16.6 Překonávání prahů nebo obrubníků

Při zdolávání malých překážek (malé schůdky, malé obrubníky atd.) sešlápněte nohu a zatlačte madla nohou dolů a směrem k sobě, abyste zvedli přední kola zdravotního kočárku, a opatrně přední kola přejeďte přes překážku. Potom pomalu zatáhněte za rukojeť nahoru, směrem od země, abyste zvedli zadní kola zdravotního kočárku a opatrně přejeďte zadními koly přes překážku.

16.7 Převaha v autě a v jiných vozidlech

Chcete-li Pegaz přepravit v autě, vyjměte z kočárku veškeré příslušenství a uložte je na bezpečném místě. Poté je potřeba kočárek rozebrat a dát do kufru.

Pokud se demontovaný zdravotní kočárek nenachází v zavazadlovém prostoru vozu, odděleně od prostoru pro cestující, bezpečně připevněte rám zdravotního kočárku k vozidlu. K tomuto účelu lze použít nepoužité bezpečnostní pásy.

Pro přepravu zdravotního kočárku, v jiných vozidlech, jako jsou např. vlaky, tramvaje, autobusy, letadla, lodě apod., by se osoby odpovědné za přepravu v těchto dopravních prostředcích měly zeptat na podmínky bezpečného cestování do destinace s zdravotním kočárkem a příslušné požadavky.

Pro bezpečnou přepravu zdravotního kočárku Pegaz v jiných vozidlech vyjměte z kočárku veškeré příslušenství a uložte je na bezpečném místě. Poté kočárek rozeberte a umístěte jej do zavazadlového prostoru daného vozidla. Pokud se demontovaný zdravotní kočárek nenachází v zavazadlovém prostoru

vozidla, odděleně od prostoru pro cestující, musí být rám zdravotního kočárku bezpečně připevněn k vozidlu.

Kočárek Pegaz by se neměl používat jako sedačka pro přepravu dítěte ve vozidle.

16.8 Čištění a péče

Polstrování lze prát pouze ručně a to při teplotě do 30 °C

Neperte v pračce. Skvrny by měly být odstraněny, jakmile se objeví na povrchu kočárku.

VAROVÁNÍ! Nečistěte chemikáliemi obsahujícími rozpouštědla a bělidla. Výrobce neručí za škody vzniklé použitím nevhodných čisticích prostředků.

Nedrhňte - otěrem se skvrna rozšíří na větší plochu a může narušit texturu látky a zničit její povlak.

Před použitím se ujistěte, že je výrobek vždy suchý..



Prát pouze ručně



Nebělit



Nesušte v bubnové
sušičce



Sušte ve
vodorovné poloze



Nežehlit

Zacházení se skvrnami od vody, jako jsou skvrny od jídla, pití a rostlinného oleje:

- Skvrnu osušte tlakem po celém jejím povrchu na bílý papírový ručník, ubrousek nebo savý čistý hadřík.
- Navlhčete malý kousek hadříku slabým roztokem saponátu a teplé vody (nebo studenou vodou, pokud je potřísněna krví) a skvrnu opláchněte odstraněním zvenčí dovnitř, aby se nezvětšila. Nepoužívejte příliš mokré hadřík, protože nadměrné množství tekutiny může po zaschnutí způsobit zvlnění nebo se skvrna zvětší a poškodí čalounění nebo pěnu uvnitř.
- Může být nutné opakovat výše uvedený krok v závislosti na typu skvrny a množství znečištěného materiálu. Pokračujte v tom, dokud není skvrna zcela odstraněna, ale vždy pamatujte na odstranění přebytečné vlhkosti z potřísněného materiálu před dalším opláchnutím.
- Poté materiál opláchněte pouze vlažnou vodou bez saponátu, čistou houbou nebo čistým bílým hadříkem. Suchý.

17. Skladování kočárku

Kočárek by měl být skladován v čisté, suché a dobře větrané místnosti, nejlépe při 0-35°C.

17.1 Příprava kočárku na dlouhodobé skladování

W Abyste mohli zdravotní kočárek Pegaz připravit k dlouhodobému uskladnění, zajistěte výrobek a proveďte všechny servisní činnosti popsané v kapitole „Pravidelná kontrola“, jako by byl již pořízen. Kočárek by měl být skladován v čisté, suché a dobře větrané místnosti.

17.2 Ochrana proti korozi

Aby se zabránilo poškození kočárku korozí, neměl by být používán ani ponechán v mokrých a vlhkých místnostech.

Poté, co se kočárek namočí, otřete všechny namočené části měkkým suchým hadříkem a chraňte lehkým konzervačním prostředkem na bázi oleje. To neplatí pro čalounění kočárku, jehož čištění a údržba je podrobně popsána v kapitole Čištění a péče.

Kočárek je standardně pokryt vysoce kvalitními nátěry. V případě poškození laku by mělo být poškození zajištěno opravou lakem navrženým výrobcem.

Pravidelné čištění a mazání mechanismů kočárku lehkým olejem zaručuje dlouhé a bezproblémové používání kočárku.

18. Opětovné použití

Produkt lze znovu použít. Všechny opakovaně použitelné produkty podléhají zvláštní zátěži. Jejich vlastnosti a výkon se proto mohou od nového produktu lišit natolik, že je ohrožena bezpečnost pacientů a třetích osob při jejich používání. Při správné péči a údržbě si výrobek zachovává svou kvalitu po dobu 3 let a to je předpokládaná doba jeho používání. Pro opětovné použití:

- Demontujte všechny čalouněné prvky a nahradte je novými.
- Rám kočárku s kolečky a vodícími prvky by měl být důkladně vyčištěn a dezinfikován čisticími a dezinfekčními prostředky dostupnými na trhu.
- Poté musí být výrobek zkontrolován autorizovaným servisním střediskem (viz kapitola 23) nebo výrobcem, zda není opotřebován a poškozen.
- Všechny opotřebované díly a součásti, které nesedí nebo nejsou vhodné pro uživatele, musí být vyměněny za nové.
- Takto připravený výrobek lze znovu použít u žijících.

19. Servis a periodické prohlídky

Pro bezpečné a bezproblémové používání zdravotního kočárku Pegaz je nutné jej pravidelně a důkladně kontrolovat a provádět servis uvedený v tabulce níže.

V situaci, kdy uživatel kočárku není schopen provádět výše uvedené činnosti vlastními silami, by měl kočárek vrátit do odborného servisu kočárku nebo přímo výrobcí, který jej řádně zkontroluje a provede potřebné servisní činnosti. Tyto činnosti mohou být dodatečně splatné.

Případné opravy provádějte ve specializovaných autorizovaných dílnách (viz bod 23) nebo přímo u výrobce.

Ve kočárku mohou být použity pouze originální náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem.

Servisní činnosti by měly být prováděny:

- Před každým použitím kočárku

o Kontrola účinnosti brzd - po zabrzdění by měla být obě zadní kola kočárku zablokována a nesmí se otáčet

o Kontrola upevnění konstrukčních prvků - Zkontrolujte všechny mechanismy kočárku a jeho pohyblivé prvky, zejména dbejte na: správnou instalaci bezpečnostní zábrany nebo terapeutického stolku, správnou funkci pětibodových bezpečnostních pásů, správně zajištěné opěradlo mechanismus úhlového nastavení a správná instalace stupačky.

o Kontrola stavu pneumatik - Zkontrolujte, zda pneumatiky na všech čtyřech kolech nejsou poškozené nebo opotřebované

o Kontrola pevných prvků rámu, sedáku s opěradlem a rámu podnožky - Vizuálně zkontrolujte stav konstrukčních profilů. Tyto prvky nesmí být poškozené nebo prasklé.

Každých šest měsíců

- Čištění kočárku - Všechny pohyblivé části, ložiska, nastavovací mechanismy očistěte měkkým hadříkem a poté je namažte několika kapkami lehkého oleje. Dávejte pozor, abyste neušpinili čalounění kočárku nebo své vlastní oblečení.
- Kontrola uvolnění všech šroubových spojů - Pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a knoflíky na kočárku řádně utaženy.
- **Každých šest měsíců**
 - Kontrola čistoty čalounění a kontrola celkového stavu kočárku - Nedovolte, aby byl kočárek zanedbáván, jak je popsáno v kapitole "Čištění a péče"
 - Kontrola celkového stavu kočárku. Nedovolte, aby byl zdravotní kočárek zanedbán

20. Zapracování

Likvidace a recyklace: Váš použitý kočárek by měl být odevzdán do recyklačního střediska v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi.

21. Splnění požadavků na zdravotnické prostředky

Zdravotnický prostředek I. třídy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017. o zdravotnických prostředcích. Výrobce na výrobek vydal příslušné prohlášení o shodě, které lze nalézt na www.mywam.eu

22. Poznámky

23. Seznam autorizovaných servisních míst

POLSKA

MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp. Jawna

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska

tel.: +48 32 733 11 31

Strana internetowa: www.mywam.eu

adres e-mail: mywam@mywam.pl

24. Záruční list

Sériové číslo:

Datum nákupu: - -

Razítko a podpis prodejce:

.....

.....

.....

Záruční podmínky

- Výrobce poskytuje kupujícímu záruku na zakoupený kočárek po dobu 24 měsíců od data nákupu. Vady odhalené během tohoto období budou bezplatně odstraněny.
- Kupující reklamující kočárek by měl dodat kočárek prodávajícímu nebo výrobcí v originálním továrním balení spolu s částmi kočárku chráněnými proti poškození.
- Poškození způsobené nedostatečným zajištěním kočárku a jeho součástí při přepravě nepodléhají záručním opravám.
- Reklamující nesmí požadovat spropitné, pokud zásilku kočárku a jeho součástí nesprávně označí nebo nesprávně pojistí.
- Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy kočárku.
- V rámci záruční opravy nelze provádět činnosti uvedené v příručce, které je uživatel povinen provádět samostatně a na své náklady.
- Kočárek by měl být používán v souladu s tímto návodem k obsluze.
- Použití kočárku v rozporu s jeho zamýšleným použitím, v rozporu s tímto návodem nebo v rozporu se zásadami správného použití způsobí ztrátu záruky.
- Jakékoli změny konstrukce zdravotního kočárku ruší platnost záruky.
- Záruka se nevztahuje na poškození kočárku způsobená: nesprávným používáním, nevhodnou údržbou, nevhodným skladováním kočárku, mechanickým poškozením a také přirozeným otěrem a opotřebením dílů (např. čalounění, kola). Jsou opraveny na náklady uživatele.
- Výrobce nedoporučuje provádět záruční opravy v neautorizovaných servisních střediscích. Taková oprava nebo neoprávněná úprava kočárku ruší platnost záruky.
- Záruční list je platný za předpokladu, že obsahuje: datum prodeje potvrzené firemní pečeti prodávajícího, podpis prodávajícího, typ a sériové číslo nákladního vozidla.
- Záruční list je platný za předpokladu, že neobsahuje žádné škrtky nebo opravy.
- Výrobce nákladního vozidla provozuje pozáruční servis, který je zpoplatněn. Ve věcech, na které se nevztahuje tento záruční list, platí ustanovení občanského zákoníku.
- Veškeré záležitosti týkající se záruky a reklamace kočárku směřujte na Prodejce nebo přímo na Výrobce