

MOBIAKCARE

NÁVOD K OBSLUZE

Otočná sprchová židle 360°

REF: 0805660

Zdravotnický prostředek třídy I, nesterilní



REF: 0805660

1. URČENÍ POUŽITÍ

Sprchová židle je určena:

- pro osoby s omezenou mobilitou
- pro seniory
- pro osoby se sníženou stabilitou

Použití:

- ve sprše
- v koupelně

👉 umožňuje hygienu vsedě

👉 snižuje únavu a riziko uklouznutí

👉 umožňuje **otáčení o 360° pomocí páčky**

2. INDIKACE

Vhodné pro:

- osoby s omezenou mobilitou dolních končetin
- osoby s problémy kyčlí, zad nebo kolen
- osoby, které nevydrží stát

Uživatel musí:

- udržet rovnováhu vsedě
- být schopen samostatně sedět a vstát

3. KONTRAINDIKACE

Nevhodné pro osoby:

- s poruchou rovnováhy
- s poruchou vnímání

4. POPIS ZAŘÍZENÍ



REF: 0805660

- hliníkový rám
- otočný sedák (360°)
- opěrka zad
- područky
- výškově nastavitelné nohy
- protiskluzové koncovky



5. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte bez přečtení návodu
- Nepřekračujte maximální nosnost: **136 kg**
- Nepoužívejte poškozený výrobek

⚠ Důležité:

- Nehoupejte se na židli
- Neotáčejte židli bez použití páčky
- Nepoužívejte na nestabilním povrchu
- Neprovádějte úpravy výrobku
- Nepoužívejte při poškození



vždy používejte na 4 nohách stabilně

6. PŘED POUŽITÍM


Zkontrolujte:

- stabilitu židle
- správné sestavení
- dotažení spojů
- funkci otočného mechanismu
- pevné dosednutí nohou



židle nesmí být nestabilní nebo se viklat

7. MONTÁŽ

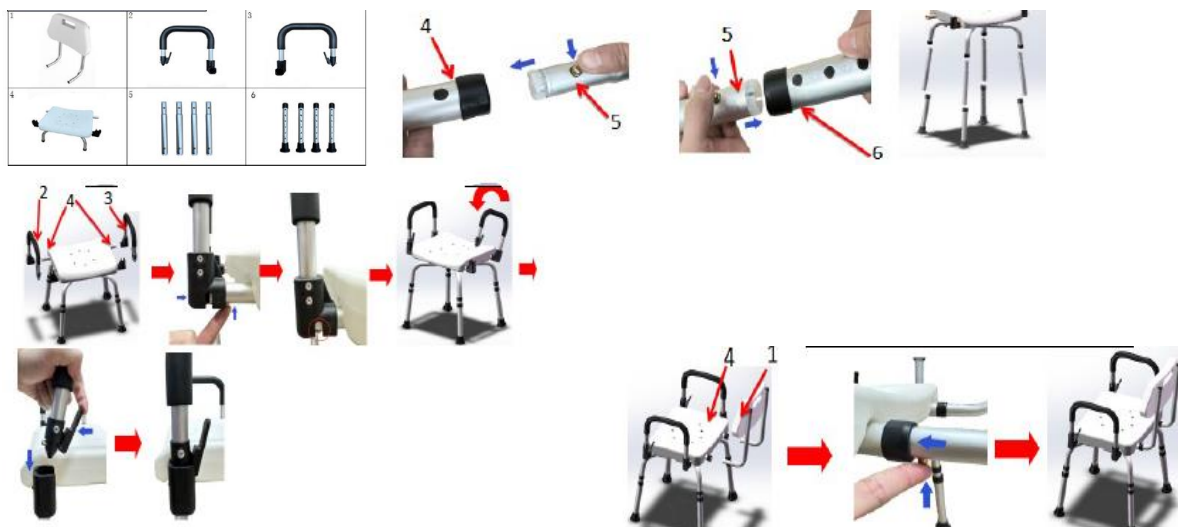

Postup:

1. Sestavte nohy
2. Připevněte sedák
3. Namontujte područky
4. Namontujte opěrku zad
5. Zkontrolujte stabilitu

👉 postup viz obrázky

8. POUŽITÍ

- postavte židli na rovný povrch
- zkontrolujte stabilitu
- posad'te se doprostřed

👉 při použití:

- udržujte všechny 4 nohy na podlaze

OTOČNÝ MECHANISMUS



- zatáhněte páčku na boku
- otočte sedák
- uvolněte páčku

👉 sedák se **zajistí kliknutím**

👉 má 4 polohy (360°)

9. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Postup:

1. Použijte rukavice
2. Odstraňte nečistoty
3. Použijte vodu nebo jemný prostředek
4. Otřete suchým hadříkem

👉 dezinfekce: běžný jemný prostředek

10. ÚDRŽBA

- kontrola stability
- kontrola spojů
- kontrola otočného mechanismu

👉 chraňte před poškozením

11. SKLADOVÁNÍ

- suché prostředí
 - mimo zdroje tepla
 - neskladujte venku
-

12. TECHNICKÉ PARAMETRY

REF								
0805660	48-51 cm	48-51 cm	40cm	34cm	34cm	43-55 cm	136kg	4.9Kg

- šířka: 48 – 51 cm
- hloubka: 48 – 51 cm
- sedák: 40 × 34 cm
- výška: 43 – 55 cm
- nosnost: 136 kg
- hmotnost: 4,9 kg

Materiály:

- rám: hliník
 - sedák/opěrka: PE
 - područky: hliník + EVA
 - koncovky: TPR
-

13. LIKVIDACE

- nevyhazujte do komunálního odpadu
 - likvidujte dle předpisů
-

14. HLÁŠENÍ INCIDENTU

Závažné události hlase:

- výrobci
 - SÚKL
-

15. ZÁRUKA

- 2 roky

Nevztahuje se na:

- opotřebení
 - nesprávné použití
 - neautorizované opravy
-

16. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- zdravotnický prostředek třídy I
- MDR 2017/745

Symbody na etiketě, obalu či používané v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorách



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním z



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

