

MOBIAKCARE

NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické polohovací lůžko KING

REF: 0811250

Zdravotnický prostředek třídy I, nesterilní



REF :0811250

1. URČENÍ POUŽITÍ

Elektrické polohovací lůžko je určeno:

- pro osoby s omezenou mobilitou
- pro pacienty vyžadující dlouhodobou péči
- pro použití v domácím i zdravotnickém prostředí

👉 umožňuje:

- polohování těla
- nastavení výšky ložné plochy
- bezpečné uložení pacienta

2. POPIS ZAŘÍZENÍ



Hlavní části:

- kovový rám
- čtyřdílná ložná plocha
- zádová opěrka
- stehenní a lýtková část
- bočnice
- čela lůžka (hlavové a nožní)
- kolečka s brzdou
- elektrické motory (4 ks)
- ruční ovladač
- hrazda s madlem

3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte bez přečtení návodu
- Nepřekračujte maximální nosnost
- Nepoužívejte poškozené zařízení
- Nepoužívejte neoriginální příslušenství

 Důležité:

- Vždy zajistěte brzdy před použitím
- Nepřemísťujte lůžko s pacientem při odjištěných kolech
- Nepoužívejte v prostředí s vodou bez kontroly elektroinstalace
- Nezasahujte do elektrických částí

 zařízení smí obsluhovat pouze poučená osoba

4. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- používejte pouze originální napájecí jednotku
- pravidelně kontrolujte kabely
- nepoškozujte vodiče

 při poškození:

- okamžitě přestaňte používat


5. PŘED POUŽITÍM

Zkontrolujte:

- stabilitu konstrukce
- dotažení spojů
- funkci motorů
- funkci ovladače
- zajištění kol

 lůžko musí stát stabilně na všech kolech

6. OVLÁDÁNÍ

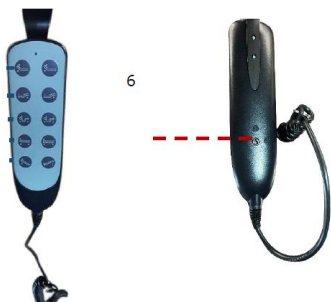

Pomocí ovladače lze:

- zvedat a spouštět ložnou plochu
- polohovat zádivou část
- polohovat nožní část
- polohovat zádivou a nožní část současně
- polohovat Trendelenburgovy polohy

👉 polohování provádějte plynule a bez trhání

7. POLOHOVÁNÍ

- nastavujte dle potřeb pacienta
- vždy sledujte bezpečnost

👉 výškové nastavení:

- **38 - 80cm**

👉 zádivá část:

- plynulé nastavení

👉 nožní část:

- plynulé nastavení

8. KOLEČKA A BRZDY





- 4 otočná kolečka
- všechna vybavena brzdou

Použití:

- zabrzdění → zatlačením páky
- odbrzdění → uvolněním

⚠ vždy zabrzdit při použití

9. MONTÁŽ

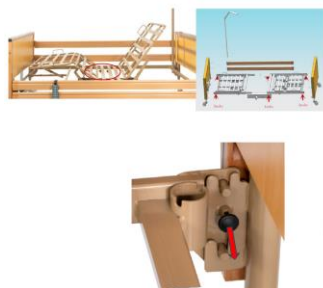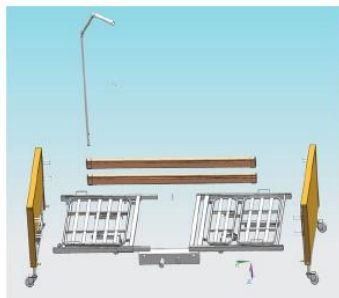

6. Connect the rest electric parts.



Postup:

1. sestavte rám
2. upevněte ložnou plochu
3. namontujte čela lůžka
4. připojte motory
5. zapojte ovladač
6. připojte napájení

👉 postup dle obrázků výrobce

10. ČIŠTĚNÍ

- používejte jemný čisticí prostředek
- otřete suchým hadříkem

❌ nepoužívejte agresivní chemii

👉 před čištěním odpojte od elektřiny

11. ÚDRŽBA

- kontrola spojů
- kontrola motorů
- kontrola kabelů
- kontrola kol a brzd

 provádějte pravidelně

12. SKLADOVÁNÍ

- suché prostředí
 - mimo vlhkost
 - mimo zdroje tepla
-

13. TECHNICKÉ PARAMETRY – REF 0811250

Parametr	Hodnota
Celková délka	215 cm
Celková šířka	132 cm
Délka ložné plochy	200 cm
Šířka ložné plochy	120 cm
Minimální výška ložné plochy od země	39 cm
Maximální výška ložné plochy od země	80 cm
Délka záďové části	74,2 cm
Délka střední části	30,4 cm
Délka nožní části	45,7 cm
Náklon záďové části	70° (±5°)
Náklon nožní části	25° (±5°)
Počet motorů a ovladač	4 motory + 1 ovladač
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg	Ano (12°)
Napájení	Vstup: 220 V / 50 Hz, výstup: 24 V
Nouzová baterie	Ne
Třída ochrany motoru	IP54
Pracovní cyklus	2 min ON / 18 min OFF
Hlučnost	< 50 dB
Čela postele	2 ks, dřevěná s krytem motorů
Kolečka	4 ks (4") s brzdou
Hrazda s hrazdičkou	Ano
Držák infuzního stojanu	Ne
Držáky na močové láhve	Ne
Úchyty pro infuzní stojan a hrazdu	Ano (2 ks)
Maximální nosnost	280 kg
Konstrukce	Ocelová
Povrchová úprava	Standardní
Postranice	Hliníkové v dekoru dřeva
Ložná plocha	Kovová
Čistá hmotnost	119 kg
Hrubá hmotnost	127 kg
Rozměr balení – lůžko	110 × 43 × 145 cm
Rozměr balení – postranice	15 × 11 × 205 cm

14. LIKVIDACE

- nevyhazujte do komunálního odpadu
- likvidujte dle místních předpisů

15. HLÁŠENÍ INCIDENTU

Závažné události hlaste:

- výrobci
- SÚKL

16. ZÁRUKA

- 2 roky

Nevztahuje se na:

- opotřebení
- nesprávné použití
- neautorizované zásahy

17. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- zdravotnický prostředek třídy I
- MDR 2017/745

Symbody na etiketě, obalu či používané v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorách



MOBIAM S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním z