



NÁVOD K OBSLUZE: *ELEKTRICKÁ POSTEL, 5-FUNKCÍ*

'LIBRA'



REF :0803151

'VIRGO'



REF :0803152



ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Postele 0803151 & 0803152 se používají pro pacienty, kteří mají zdravotní problémy a potřebují zůstat ležet na lůžku.

Jsou určeny pro osoby, které se potřebují léčit ze zdravotních důvodů nebo handicapu v domovech pro seniory, nemocnicích nebo i ve zdravotnických zařízeních.

POZOR (!):

- V případě poškození nebo nesprávné funkce vašeho produktu NEPOUŽÍVEJTE produkt a kontaktujte autorizovaného a vyškoleného zástupce.
- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu
- MOBIAS S.A. odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu a z neoprávněných úprav rámu produktu.
- MOBIAS S.A. si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění
- Existuje $\pm 3\%$. Odchylka rozměrů produktů.
- NIKDY NIKOMU NEDOVOLUJTE BÝT POD POSTELÍ NEBO MEZI KOMPONENTY RÁMU VYZVEDNUTÉ POSTELE.

OBEČNÁ UPOZORNĚNÍ:

- Pokud nečtete tuto uživatelskou příručku, raději tento výrobek ani jinou dostupnou součást nepoužívejte. Pokud nerozumíte použití nebo bezpečnostním opatřením, obraťte se před použitím produktu na prodejce nebo příslušnou technickou osobu, protože může dojít k poškození.
 - Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla.
 - Uschovejte tento dokument pro budoucí použití.
 - Buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti dětí, a nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
 - Nepřekračujte maximální užitečné zatížení.
 - Zvláštní opatrnosti je vždy zapotřebí tam, kde jsou pohyblivé části, které mohou způsobit sevření končetin a zranění. Během provozu lůžka udržujte všechny pohyblivé části a všechny hnací hřídele bez překážek.
 - Nepokoušejte se zvedat výrobek za odnímatelné části
 - Nikdy nezapojte do zásuvky, která je vyšší než 220 V AC.
 - Nikdy nepoužívejte lůžko, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku. Pokud lůžko nefunguje správně, zavolejte kvalifikovaného technika.
 - Udržujte všechny kabely mimo horké povrchy. tedy radiátory, topné podložky, přenosné plynové ohřívače.
 - Neotevírejte části, jako je motor, ruční ovládací jednotka nebo elektrická ovládací skříňka.
- Uvnitř těchto součástí nejsou žádné díly opravitelné uživatelem. Pouze vyškolený servisní personál je kvalifikovaný k opravě těchto dílů. Pokud na těchto postelích provádějí jakékoli práce necertifikované osoby, nelze uplatnit záruku.
- Pokud nebudete lůžko delší dobu používat, ODPOJTE elektrické lůžko ze zásuvky.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Jsme výhradně zodpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení jsou třídy nízkého rizika (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a tam, kde je to vhodné, normy a právní předpisy, na které se odkazuje.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ:

- Z žádného důvodu nepřekračujte maximální nosnost.
- Při spouštění hlavové nebo nožní části se ujistěte, že nikdo nevkládá ruce, nohy nebo jiné části těla pod postel
- Ujistěte se, že povrch podlahy pod postelí je rovný.

PŘED POUŽITÍM:

1. Zkontrolujte, zda není poškozený rám, aby bylo zaručeno bezpečné používání výrobku. (Na rámu nejsou žádné praskliny ani lomy).
2. V případě poškození výrobek nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce pro další pokyny.
3. Zkontrolujte, zda je výrobek správně sestaven a správně funguje a zda jsou všechny šrouby zajištěny a dobře zašroubovány.
4. Vždy zkontrolujte stav opotřebení mechanických částí, abyste zajistili naprosto bezpečné používání výrobku pro osoby a předměty.
5. Zajistěte, aby hlavová část byla zajištěna čelem a nožní část byla zajištěna stupačkou.
6. Ujistěte se, že kabel ručního ovládání a další napájecí kabely jsou správně vedeny a zajištěny tak, aby se tyto kabely během provozu elektrického lůžka nezapletly, neskříply a/nebo neuřízly. **POKUD JSOU TYTO ŠŤŮRY POŠKOZENÉ, NIKDY NEPOUŽÍVEJTE POSTEL.**
7. Abyste zabránili pohybu koleček, kdykoli lůžko stojí, ujistěte se, že jsou zámkové kolečky lůžka správně zajištěny.
8. **VŽDY** zajistěte brzdu kolečka při přesunu do lůžka nebo z ní. **PŘED** použitím lůžka zkontrolujte brzdou kolečka, abyste zajistili správnou funkci brzdy.
9. Nikdy nedovolte používat lůžko více než jedné osobě.
10. Nelehejte, nesedejte ani se neopírejte tak, aby celá váha těla ležela pouze na **ZDVIHNUTÉ** hlavové nebo nožní části lůžka. To zahrnuje i přemístění nebo přesun z lůžka nebo z ní.
11. Udržujte postel minimálně 35-40 cm od jakéhokoli přímého zdroje tepla nebo stěny.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Jakýkoli vážný incident, ke kterému dojde v souvislosti s používáním prostředku, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient pobývá.

VÝBĚR MATRACE:

Používejte matrace nebo antidekubitní matrace dle předpisu ošetřujícího lékaře.

Velikost matrace by neměla být větší než rám postele.


Do postelí jsou vhodné všechny matrace a antidekubitní **MOBI**AK.

Ujistěte se, že je matrace vystředěná na rámu. Tím se minimalizuje riziko, že uživatel uvízne mezi matrací a zábradlím postele nebo zvedacími částmi.

		0803151	0803152
1	CELKOVÁ DÉLKA	216 cm	213 cm
2	CELKOVÁ ŠÍŘE	102 cm	103 cm
3	DÉLKA LOŽNÉ PLOCHY	203cm	203 cm
4	ŠÍŘKA LOŽNÉ PLOCHY	90 cm	90 cm
5	VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY	ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ 39-80 CM	ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ 39-80 CM
	VÝŠKA MIN	39 cm	39 cm
	VÝŠKA MAX	80 cm	80 cm
6	BOČNICE S MOŽNOSTÍ SPUŠTĚNÍ	ANO	ANO
7	DÉLKA ZADNÍ ČÁSTI	74,2 cm	74,2 cm
8	DÉLKA STŘEDNÍ ČÁSTI	30,4 cm	30,4 cm
9	DÉLKA ČÁSTI POD NOHAMA	45,7 cm	45,7 cm
10	NÁKLON ZAD	70° (+-5°)	70° (+-5°)
11	NÁKLON KOLEN	33° (+-5°)	33° (+-5°)
12	MNOŽSTVÍ MOTORŮ A RUČNÍ OVLÁDÁNÍ	3 MOTORY & 1 RUČNÍ OVLÁDÁNÍ	3 MOTORY & 1 RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
13	TRENDELEBURG-ANTI-TRENDELEBURG 12°	ANO	ANO
14	ZDROJ NAPÁJENÍ	Input: 220V - 50Hz output: 24V	Input: 220V - 50Hz output: 24V
15	NOUZOVÁ BATERIE	YES, 2PCS 9V	YES, 2PCS 9V
16	KATEGORIE OCHRANY MOTORU	IP20	IP20
17	PRACOVNÍ CYKLUS	2 min ON / 18 min OFF	2 min ON / 18 min OFF
18	HLADINA HLUKU PŘI SEŘIZOVÁNÍ	<50db	<50db
19	HLAVOVÉ A KONČETINOVÉ DESKY	2 KS DŘEVĚNÉ S KRYTEM NA MOTORY	2 KS DŘEVĚNÉ S KRYTEM NA MOTORY
20	KOLA	5palcové - 4 KS S BRZDOU	5palcové - 4 KS S BRZDOU
21	HRAZDA S PLASTOVÝM ÚCHYTEM	ANO	ANO
22	I.V STOJAN	NE	NE
23	HÁČKY NA MOČOVÉ SÁČKY	NE	NE
24	MAX NOSNOST	180 Kg	180 Kg
25	RÁM	OCEL	STEEL
26	POUŽITÍ	NORMÁLNÍ LÉČBA	NOTMÁLNÍ LÉČBA
27	KOLEJNICE	BARVA BUKOVÉHO DŘEVA	BARVA BUKOVÉHO DŘEVA
28	ROŠT	S DŘEVĚNÝMI LAMELAMI	S DŘEVĚNÝMI LAMELAMI
29	NETTO VÁHA	96 Kg	90 Kg
30	BRUTTO VÁHA VČETNĚ OBALU	108 Kg	102 Kg
31	ROZMĚR KARTONU PRO HLAVNÍ RÁM	92x42x120 cm	92x42x120 cm
32	ROZMĚR KARTONU PRO LIŠTY	15x11x205 cm	15x11x205 cm

DÍLY POSTELE:

Postel je dodávána po dílech, které je nutné složit. Dá se bez problémů přenést do bytových domů. Skládá se ze dvou rámu (hlava a nohy), hlavního rámu děleného na polovinu a čtyř bočních zámkových nosníků. Lůžko je na kolečkách, které jsou vybaveny parkovací brzdou.

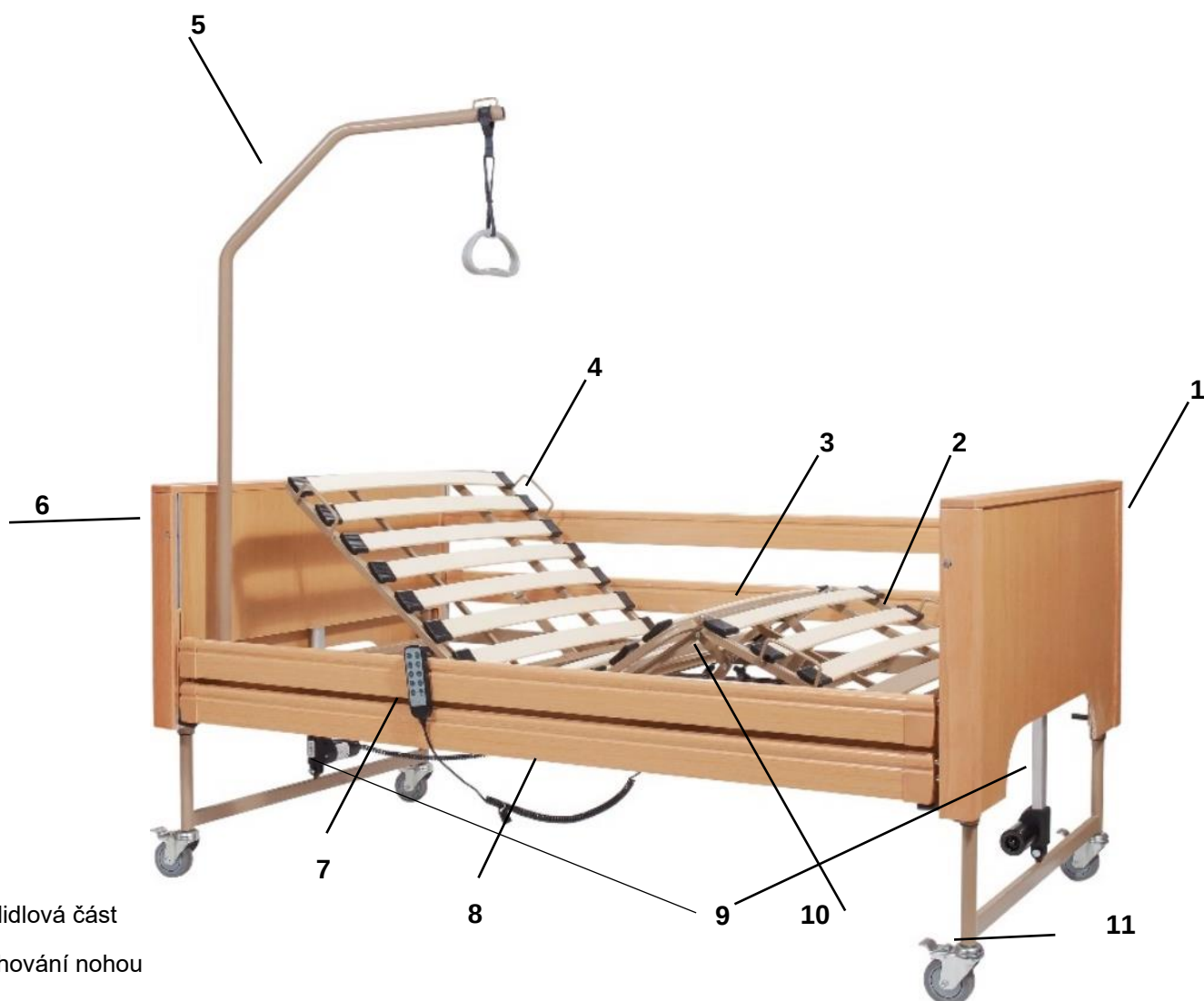


- [1] chodidlová část
- [2] polohování nohou
- [3] polohování steh
- [4] zádová polohovatelná část
- [5] Zvedací hrazda s rukojetí
- [6] hlavová deska
- [7] ovladač
- [8] Kolečnice
- [9] výškově nastavitelné motory
- [10] Motory pro zádovou a nožní část (na obrázku jsou skryté).
- [11] Kola

MONTÁŽ:

1. Otevřete krabici a vyjměte všechny části postele
2. Položte všechny jednotlivé části postele na podlahu.
3. Sestavte dvě části lůžka a zajistěte je pomocí 4 šroubů obsažených v balení produktu



4. Nainstalujte boční panely a zajistěte je pomocí čtyř šroubů, které jsou součástí balení produktu.

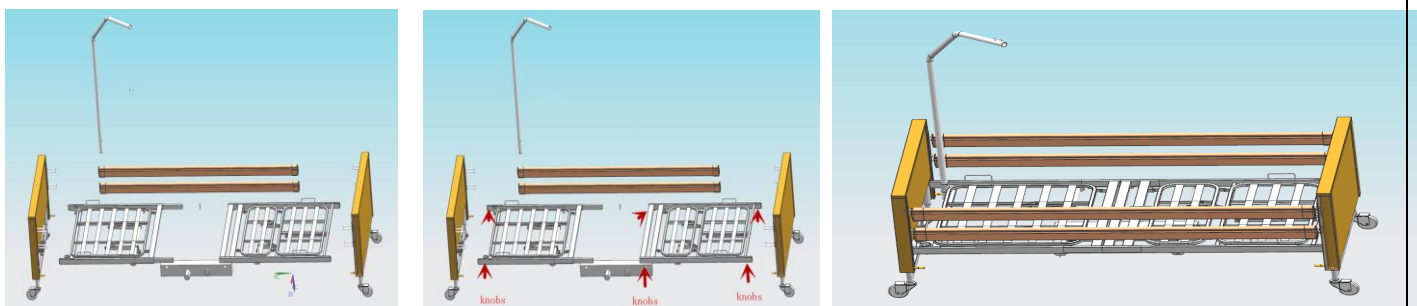

5. Nainstalujte elektrický motor na spodní část lůžka, poté, co nejprve sejmete odpovídající kryty. Po instalaci motoru jej zajistěte vložení krytů, které jste předtím odstranili.



6. Připojte zbývající elektrické části.




Vložte vodičko kolejnice do ochranného krytu kolejnice na každém bočním panelu.



7. Připojte k elektrické síti.

8. Zvedněte lůžko za pomoci ovladače

9. Protáhněte kolejnice hliníkovou základnou pod úhlem od horní metopy k dolní metopě.

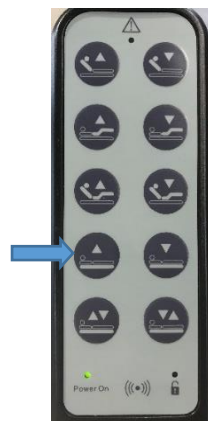


OVLADAČ


Všechny postupy elektrického nastavení lze ovládat pomocí ovladače. Rozsah nastavení všech funkcí je elektricky / mechanicky omezen v povoleném rozsahu. Z bezpečnostních důvodů jsou v ručním ovladači integrovány zamykací funkce. Nastavovací procedury mohou být zablokovány v ovládání pro ochranu pacienta, pokud je to nutné, podle názoru ošetřujícího lékaře.

- Ruční ovladač lze zavěsit na postel pomocí vlastního gumového háčku
- Hnací motory pracují tak dlouho, dokud je stisknuto příslušné tlačítko

Ovladač má uzamykací systém pomocí magnetického senzoru pro větší bezpečnost uživatele. Zamkněte a odemkněte ovladač následovně:

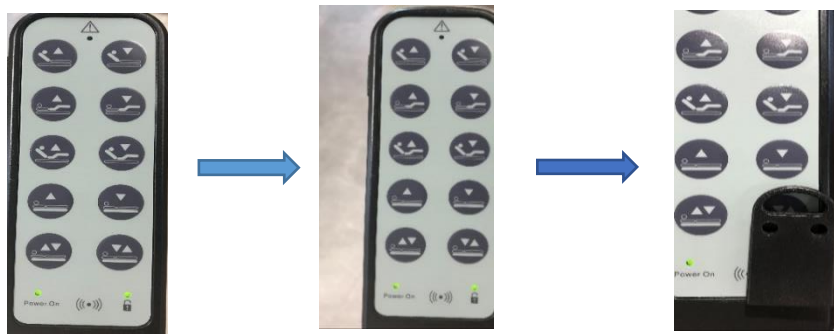

1. Nastavení opěradla
2. Nastavení opěrky nohou
3. Nastavení opěrky zad a nohou
4. Nastavení výšky postele
5. Nastavení Trendelenburg / Anti-Trendelenburg polohy
6. Magnetický snímač
7. Symbol zamknutí/odemknutí

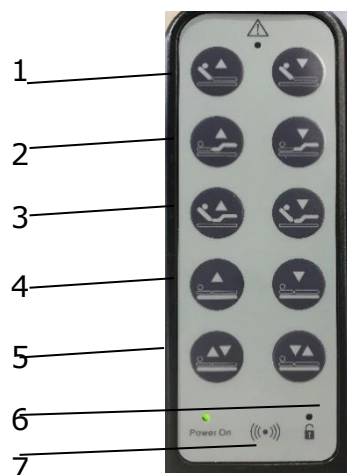

Záloha za pomoci baterie:

V případě výpadku proudu umožní standardní 9voltová baterie v motoru uživateli snížit hlavovou a nožní část lůžka. NEDOVOLÍ motoru lůžka zvedat část hlavy nebo chodidel.

POZNÁMKA: Pravidelně vyměňujte baterii.

POZNÁMKA: Baterie není součástí balení.

DEMONTÁŽ:

Postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí. Při demontáži lůžka se ujistěte, že jsou všechny díly v nejnižší poloze.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:

Před čištěním postel odpojte. Při používání tekutin na lůžku nebo v jeho okolí byste měli dávat pozor, abyste nenamočili elektrické části.

Pokud se do elektrického lůžka nebo kolem něj rozlije tekutina, odstraňte rozlitou tekutinu a před opětovným použitím elektrických ovladačů nechte lůžko nebo jeho okolí důkladně vyschnout.

Na povrchy, které vyžadují čištění, používejte pouze mokré hadřík a jemné mýdlo.

Poté před použitím produkt důkladně osušte.

NENECHÁVEJTE výrobek vlhký - před použitím lůžka je nechte zcela vyschnout.

Pravidelně zvedejte hlavovou a nožní část lůžka a odstraňujte veškerý prach z rámu.

Pravidelně vyjímejte matraci a čistěte rošt matrace.

K čištění rámu nepoužívejte chemické čističe. Mohlo by dojít k poškození povrchu.

Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný jemný dezinfekční prostředek.

Chraňte předmět před poškrábáním, prořiznutím a proražením.

Pravidelně kontrolujte všechny elektrické a mechanické součásti lůžka, zda nejsou poškozené nebo nadměrně opotřebované (tj. prasklé, roztřepené nebo rozbité kryty nebo opotřebované součásti).

Pravidelně kontrolujte všechny funkce lůžka: Opěrka hlavy se správně zvedá a spouští. Opěrka nohou se správně zvedá a spouští. Výška postele se správně zvyšuje a snižuje.

Chraňte elektrické části před prachem a vlhkostí.

Mazání. Lehce namažte všechny ovladače, šrouby a závity bílým lithiovým mazivem. Namažte všechna válečková a otočná ložiska lehkým strojním olejem.

Běžné čištění a elektrickou kontrolu by měl provádět uživatel. Veškeré opravy a údržbu lůžka by měl provádět kvalifikovaný technik. Po jakýchkoli úpravách, opravách nebo servisu a PŘED použitím se ujistěte, že jsou všechny upevňovací prvky bezpečně utaženy



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Pokud jednoho dne zjistíte, že je třeba váš produkt vyměnit nebo vám již nefunguje, zvažte ochranu životního prostředí:

- 1) Nelikvidujte svůj výrobek spolu s ostatním komunálním odpadem (toto je také význam zobrazeného recyklačního symbolu).
- 2) Obráťte se na své veřejné úřady a ty vás poučí o recyklačních střediscích, ve kterých musí být váš produkt zlikvidován.
- 3) Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí a také recyklaci součástí produktu.
- 4) Elektrické výrobky mohou kvůli svým konstrukčním materiálům, pokud nejsou správně zlikvidovány, vést k ohrožení životního prostředí a navíc zdraví

ZÁRUKA:

Na výrobek je poskytována záruka po dobu dvou (2) let na rám a jeden (1) rok na jeho elektrické komponenty od data zakoupení.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a NEVZTAHUJE se na škody způsobené nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k obsluze produktu. NEZAKRÝVÁ části, které se mohou během používání nebo časem opotřebovat, jako je čalounění, kola, brzdy, dřevěné nebo plastové části.

Záruka se nevztahuje na poškození nebo závady způsobené přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, problémy s napájením (pokud je to relevantní), dopravci.

Není zahrnut žádný servis ani náhradní díl, pokud nebyl zkontrolován autorizovaným servisním oddělením nebo výrobcem produktu. Převážné náklady na záruční zboží hradí uživatel-zákazník nebo prodejce.

Eldomed s.r.o. , web: www.eldomed.cz, Tel.: +420 602 770 375, 739 585 777

ZÁRUČNÍ FORMULÁŘ

ÚDAJE O KUPUJÍCÍM			
JMÉNO A PŘÍJMENÍ :			
DATUM NÁKUPU:		TELEFON	
SÉRIOVÉ ČÍSLO:			
LOT :			
ÚDAJE O PRODEJCI			
JMÉNO A PŘÍJMENÍ			
ADRESA			
TELEFON			
			PODPIS A RAZÍTKO



MOBIAK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



PŘÍLOHA D – SYMBOLY

Symboly na etiketě, obalu či používané v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorech



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením