



**PRO  
DU  
KTY**

**LW**



**19/20**

# Baffin neoSIT

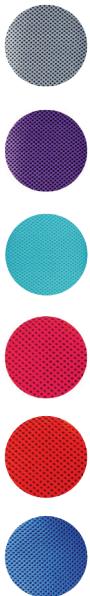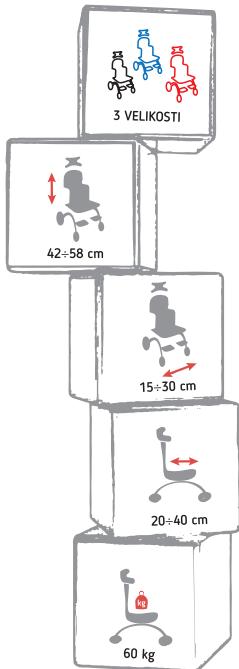

Baffin neoSIT je ortopedické křeslo pro děti stabilizující záda a hlavu.

Skládá se ze sedadla, opěradla, bočních opěrek, opěrek nohou s dorazovými plošinami, opěrek hlavy, bederního pásu, vesty, stolu a mobilní základny, která je podpěrou zařízení. Celkem je pokrytý odnímatelným čalouněním pro účely praní.

## FUNKCE Baffin neoSIT



Patentovaný systém „second spine“ umožňuje anatomické nebo korekční umístění opěradla sedadla.

Lehký a kompaktní design umožňující polohu sezení a polo-lehu.

Bočné opěrky stabilizující trup s možností asymetrického nastavení.



Systém opěrek, vesta a stabilizační popruhy umožňují korekci vad držení těla a správnou polohu páteře a páne dítěte.


Stolek pro zábavu, učení a terapeutické činnosti.

Opěrka hlavy se přizpůsobuje tvaru a poloze hlavy. Výborná stabilizace nejdůležitější části těla malého pacienta.

# Travel SIT



**lehký  
mobilní  
kompaktní**

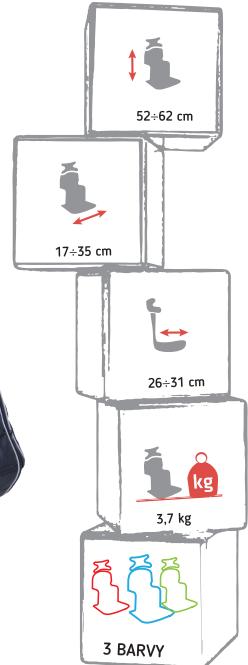

**Hmotnost : 3,7 kg**

**Rozsah : Celý svět**

**Čas rozložení : 30 sekund**

**Štěsti a blízkost dítěte : 100%**



**PŘEPRAVA**



**ŠKOLA**



**ŠKOLKA**



**RESTAURACE**




**TRAVEL  
SIT**

**V každodenním  
životě**



**ZÁBAVA**

# Baffin Automatic

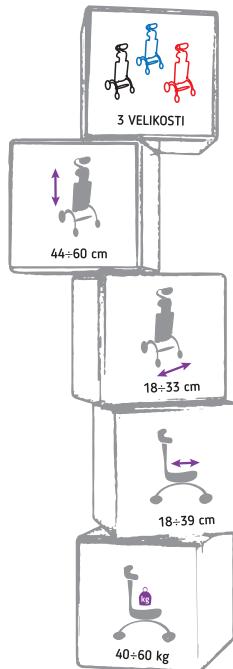

Multifunkční zařízení Baffin Automatic je určeno pro vertikalizaci, stabilizaci v sedu a ležící pozici a pro přepravu pacienta. Produkt je určen pro děti i týnedžeri.

Baffin Automatic umožňuje vytvořit správný vzor držení těla. Pacient sedící v zařízení se může účastnit vzdělávacích kurzů, ergoterapie nebo her. Baffin podporuje aktivaci pacienta a budování kognitivních funkcí. Zařízení je ovládáno pomocí elektrického servopohonu. Změna polohy mezi sezením, ležením a postavením se provádí pomocí dálkového ovladače.

## FUNKCE Baffin Automatic



Patentovaný systém „second spine“ umožňuje anatomické nebo korekční nastavení opěradla sedadla.



Nastavitelné kyčelní a loketní opěrky.



Stolek – velká pracovní plocha poskytuje pohodlí během terapeutických lekcí.




Systém opěrek, vesta a stabilizační popruhy.




Nožní plošiny nastavitelné ve všech směrech.



Nastavitelná elastická opěrka hlavy se přizpůsobuje tvaru hlavy.

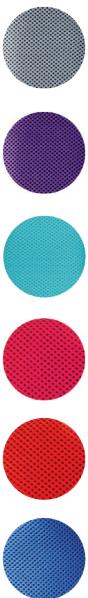


# Baffin TRIO

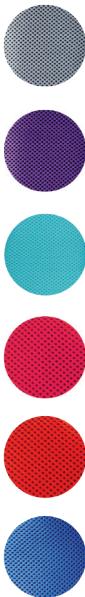

Multifunkční zařízení Baffin TRIO je určeno pro vertikalizaci, stabilizaci v poloze sezení i ležení i pro přepravu pacientů. Produkt je určen pro mládež i dospělé.

Pacient vybavený zařízením se může účastnit vzdělávacích kurzů, ergoterapie nebo her při zachování správné polohy sedu. Baffin TRIO je skvělým nástrojem pro fyzioterapeuty, který usnadňuje zahájení procesu vertikalizace u nejnáročnějších pacientů s kontrakturami kolenního a kyčlkového kloubu.

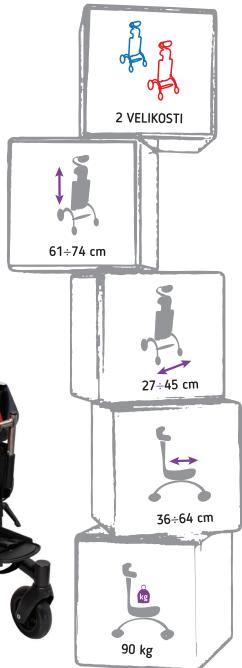

## FUNKCE Baffin TRIO



Patentovaný systém „second spine“ umožňuje anatomické nebo korekční nastavení opěradla sedadla.



Možnost vertikalizace z libovolné polohy - sedící, ležící a mezipolohy.



Systémy odnímatelných polštářků, pánevních a loketních opěrek pro snadný přenos pacienta na zařízení.



Výškově nastavitelná rukojet.




Intuitivní změna polohy zařízení pomocí dálkového ovladače.



Nastavitelná elasticální opěrka hlavy se přizpůsobuje tvaru hlavy.

# Rico Buggy

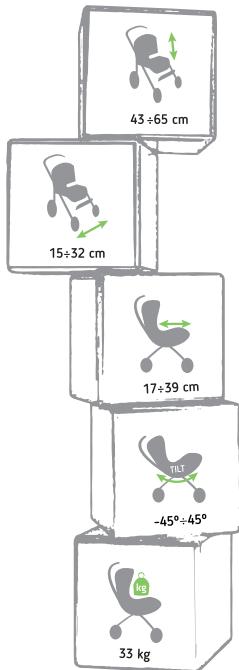

FUNKCE RICO Buggy




Sedadlo může být nastaveno asymetricky pro levou a pravou dolní končetinu - umožňuje tak podporu pro celou délku stehna, a to i při 10 cm rozdíle v délce končetiny.



Sklopení (od -45° do 45°) - nastavitelný úhel opěradla sedadla (k dispozici v poloze ve směru jízdy dopředu i dozadu).



Bederní opěrný systém - umožňuje nastavit opěradlo sedadla podle zakřivení bederní páteře.

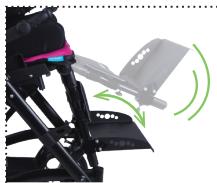

Opěrka pro nohy - úhel opěrk pro nohy je nastavitelný (od 0° do 90°) a výška a úhel platformy pro nohy jsou také nastavitelné (od -20° do 20°).



Speciální dětský invalidní vozík RICO Buggy je určen pro děti od 6 měsíců věku, do hmotnosti 30 kg.

Díky jedinečnému designu a široké škále funkcí je RICO Buggy vyhledávaným odborníkem na přepravu dětí. Díky možnosti asymetrického nastavení hloubky sedadla nebo nastavení pro levou a pravou dolní končetinu je vozík ideální pro pacienty s nerovnoměrnou délkou dolních končetin.

**Vozík pro děti od 6 měsíců věku.  
Asymetrická hloubka sedadla.  
Dvě zaměnitelné opěrky hlavy.**



Nezávisle nastavitelné pánevní, hrudní a hlavové opěrky - možnost asymetrického nastavení.




Skládací jízdný rám spolu se sedadlem.

# Coco



Zdravotnický výrobek COCO je vertikalizátor umožňující vzpřímené umístění v přední a zadní poloze a zároveň možnost odchýlení dolních končetin.

Základní verze sestává z rámu s funkcí vzpřímené polohy, kol s brzdami, trupových opěrek, zadní podpory pánev (stabilizace pánev), pánevních opěrek, hrudního pásu, chráničů kolen a stupaček na nohy s popruhy na nohy.

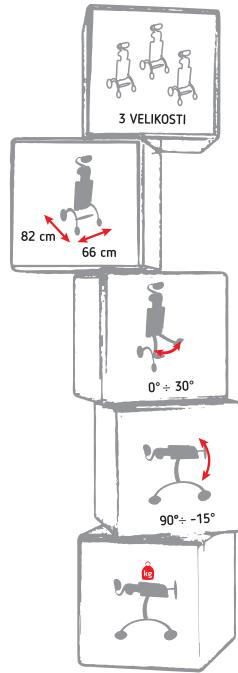

## FUNKCE Coco



Odhýlení kyčelního kloubu ve svíslé poloze s měřením úhlu pro levou a pravou nohu umožní nastavit nohy v rovině takovým způsobem, který zajistí správné zarovnání hlavice kloubu v kloubní jamce. Výsledkem je odchýlení, které zaručuje správné umístění kyčle a následně zabrání dysplasii tohoto kloubu.



Svislost v přední a zadní poloze s funkcí měření svíslého úhlu (90° ÷ -15°). Spolu s funkcí měření odchýlení úhlu kyče (0° ÷ 30°) získá terapeut přesné zařízení pro provádění bezpečného vzpřímení postavy pacienta.



Ohybání dolních končetin – systém umožňuje nastavení pravého úhlu v kolenním kloubu – doporučeno pro pacienty s kontrakturnemi v kolenních kloubech.



Systém opěrek a pás stabilizující pacienta v bezpečné terapeutické poloze. Zařízení podepírá boky, záda, pánev a trup pomocí opěrek a dvou popruhů stabilizujících pacienta.

3D plošiny pro chodidla – umožňují nastavit libovolnou korekční polohu levé a pravé nohy. Chodidlo v hřebinetní a plantární flexi a také možnost supinace a pronace chodidla.

Stolek – velký pro zábavu, učení a terapeutické činnosti. Používá se pro upevnění ve vzpřímené poloze zepředu i zezadu.



# KONTAKT