MOBIAKCARE

Návod k obsluze

Koupelnová židle (sprchová) – zesílená

REF: 0813109 / 0813110
Zdravotnický prostředek třídy I, nesterilní

---

1. URČENÍ POUŽITÍ

Židle je určena pro:

- osoby s omezenou pohyblivostí
- seniory
- osoby po úrazech nebo operacích

Slouží k bezpečnému provádění hygieny vsedě:

- ve sprše
- ve vaně
- mimo koupelnu

👉 snižuje riziko uklouznutí a únavy

---

2. INDIKACE

Vhodná pro:

- osoby s omezenou mobilitou dolních končetin
- osoby s problémy v oblasti kyčlí a bederní páteře
- uživatele invalidního vozíku

Uživatel musí být schopen:

- udržet rovnováhu vsedě
- samostatně sedět a vstát

---

3. KONTRAINDIKACE

Nevhodné pro osoby:

- s poruchou rovnováhy
- s poruchou vnímání

4. POPIS ZAŘÍZENÍ



REF : 0813109



REF : 0813110

- ocelová konstrukce
- sedák (s opěrkou / bez opěrky)
- výškově nastavitelné nohy
- protiskluzové koncovky

---

5. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte bez přečtení návodu
- Nepřekračujte maximální nosnost
- Nepoužívejte poškozený výrobek
- Nepoužívejte k jinému účelu

⚠ Rizika:

- uklouznutí na mokrém povrchu
- nesprávné sestavení
- nestabilita
- Nepřenášejte výrobek za odnímatelné části
- Držte mimo dosah dětí

---


6. PŘED POUŽITÍM

Zkontrolujte:


- zda není rám poškozen
- správné sestavení
- dotažení všech šroubů
- opotřebení částí


👉 nohy musí pevně stát na podložce / ve vaně


🔧 7. MONTÁŽ

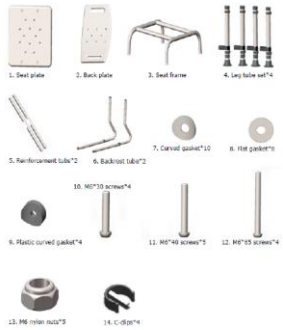



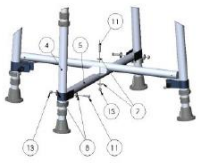

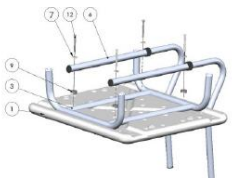

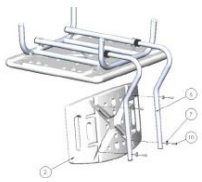

Postup:

1. Spojte hlavní rám pomocí šroubů M6×65
2. Připevněte sedák (M6×30)
3. Vložte opěrku (pokud je součástí)
4. Připevněte výztuhy a dotáhněte šrouby
5. Zkontrolujte stabilitu konstrukce

8. POUŽITÍ

- postavte židli na rovný povrch
- ujistěte se o stabilitě
- posaďte se doprostřed sedáku

⚠ Nepřetěžujte jednu stranu

9. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

- použijte rukavice
- očistěte vodou nebo jemným prostředkem
- osušte

❌ nepoužívejte agresivní chemii

10. ÚDRŽBA

- pravidelná kontrola
- kontrola šroubů
- kontrola opotřebení

11. SKLADOVÁNÍ

- suché prostředí
- mimo zdroje tepla

12. TECHNICKÉ PARAMETRY

REF								NET WEIGHT
0813109	48.5 cm	48.5 cm	55 cm	50 cm	41 cm	47-59.5 cm	180 Kg	3 Kg
0813110	48.5 cm	48.5 cm	55 cm	50 cm	-	47-59.5 cm	180 Kg	2.5 Kg

Model 0813109 (s opěrkou)

- rozměry: cca 48,5 × 48,5 × 55 cm
- výška: 47 – 59,5 cm
- nosnost: 180 kg
- hmotnost: 3 kg

Model 0813110 (bez opěrky)

- rozměry: cca 48,5 × 48,5 × 55 cm
- výška: 47 – 59,5 cm
- nosnost: 180 kg
- hmotnost: 2,5 kg

13. LIKVIDACE

- nevyhazujte do komunálního odpadu
- likvidujte dle předpisů

14. HLÁŠENÍ INCIDENTU

Závažné události hlaste:

- výrobci
- SÚKL

15. ZÁRUKA

- 2 roky

Nevztahuje se na:

- opotřebení
- nesprávné použití
- neautorizované opravy

16. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- zdravotnický prostředek třídy I
- MDR 2017/745

Symboly na etiketě, obalu či používané v manuálu

CE

MOBIAK®
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977



zdravotnický prostředek



výrobce


číslo produktu


výrobní číslo


šarže



unikátní označení produktu


udržujte v suchu


zacházejte opatrně


použití pouze ve vnitřních prostorách

MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením